




Trainer Module

En GH3+ loftlift, der er udstyret med Trainer Module, er ikke blot en perfekt løfte- og forflytningsløsning. Den giver også mulighed for at forbedre patientens mobilitet og fysiske funktion gennem sikre og vægtaflastede genoptræningsøvelser på stuen.

Når Guldmann Trainer Module er aktiveret vil GH3+ understøtte patientens vægt dynamisk, og patientens kropsvægt kan aflastes med op til 100 kg.

Modulet har en kapacitet på op til 30 minutters brug, når loftliftens batteri er fuldt opladet. Efter 30 minutter vil Trainer Modulet automatisk slukke. Herefter er liften med det samme klar til løft og forflytning, og opladningen genoptages. 1 times opladning = 10 minutters træningstid.

Guldmann Trainer Module startes, styres og overvåges via den digitale håndbetjening. Det fremgår tydeligt, når modulet er aktiveret. LCD-skærmen på håndbetjeningen viser det antal kg, der aflastes med samt den resterende træningstid.

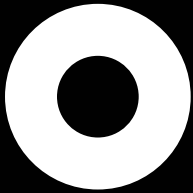

Ét system – mange muligheder

Simpelt og fleksibelt system

- Op til 100 kg vægtaflastning i trin på 1 kg
- Træningssessioner på op til 30 minutter
- Faldbeskyttelse
- Hænderne fri giver mulighed for at fokusere på kvaliteten i træningen
- Nem at anvende
- Løftliften kan bruges til løft og forflytning, når den ikke anvendes til træning

Trainer Module fjører endnu en funktion til de mange anvendelsesmuligheder, som Guldmanns løftlifte byder på ud over at løfte op og ned.

Med Trainer Module er det muligt at påbegynde rehabilitering med dynamisk vægtaflastning allerede på patientens stue.

Typiske genoptræningsøvelser med dynamisk vægtaflastning i Trainer Module: Gangtræning, balance, siddende-til-stående, squat, gang på/over forhindringer og andre øvelser.

