

**BEDRE LIVSKVALITET
FOR DINE KUNDER!**

Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-16 60
F +49 (0) 36628 66-16 99
E info@bauerfeind.com

FYSIO-SHOP.dk

**DANMARK
FYSIO-SHOP.DK**
Østergade 3,
Sundhedshuset Hadsten
8370 Hadsten
T +45 42721092
info@fysio-shop.dk

Rev. 3 – 2020-10

BAUERFEINDDANMARK.DK



PRODUKTKATALOG BANDAGER OG ORTOSER 2020 | 2021

BAUERFEIND®

PRODUKTKATALOG BANDAGER OG ORTOSER

2020 | 2021

BAUERFEINDDANMARK.DK

BAUERFEIND – LAVET AF MENNESKER TIL MENNESKER. FOR MERE LIVSKVALITET.

Bauerfeind AG er en af verdens førende producenter af medicinske hjælpemidler. Med vores produkter gør vi mennesker mobile og yder derved et vigtigt bidrag til at genoprette og bevare et godt helbred.

MEDICINSK VIDEN OG FAGLIG KOMPETENCE

Vi har opnået vores kompetencer gennem årtiers teknologisk og produktionsmæssig erfaring, og dem kombinerer vi med innovationskraft og traditioner. Bauerfeind er en mellemstor, familieledet virksomhed, som praktiserer global tænkning. Helt fra begyndelsen har vores specialister arbejdet tæt sammen med læger, forskere og produktudviklere. Resultatet er patenterede og prisbelønnede produkter og serviceydelser.

Bauerfeind bandager og ortoser udvikles og produceres i Tyskland – fra første søm til færdigt produkt.

EFFEKTIVT UDVALG

Bauerfeind har påtaget sig at bidrage med moderne, ortopædiske bandager og ortoser, så mennesker kan føre et aktivt og ubesværet liv selv i en høj alder. Produkterne er karakteriseret ved medicinsk bekræftet effekt og unikke materialeegenskaber.

Bandagerne og ortoserne tilbyder støtte under ophealing efter skader, degenerative ændringer samt efter operationer og sørger for nye niveauer af bevægelighed. Bauerfeinds høje kvalitetsstandarder garanterer produkternes fremragende virkning.

KOMPROMISLØS KVALITET

Produkterne fra Bauerfeind opfylder ikke bare gældende standarder – de tilfredsstiller samtidig de højeste krav inden for kvalitet, effekt og komfort. Det bekræfter de regelmæssige kvalitetskontroller, der har resulteret i diverse kvalitetsmærkninger og certificeringer.

Alle Bauerfeind bandager og ortoser opfylder kravene i tysk lov om medicinsk udstyr (Medizinproduktegesetz – MPG) og EU-direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EEC. CE-mærkningen og certifikatet ifl. DIN EN ISO 13485 garanterer pålidelig kvalitet.

Bemærk:

Medicinske hjælpemidler fra Bauerfeind kan udleveres uafhængigt af alderen, såfremt målene på den pågældende kropsdel passer til det produktspecifikke størrelsessystem.

● MADE
● IN
● GERMANY



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BAUERFEIND AG (GENERELLE HANDELSVILKÅR) INTERNATIONALT

Priserne

Alle priser angives netto fra fabrik/lager i danske kroner plus fragt og eventuelle afgifter.

Forsendelse

sker for købers regning og risiko, selvom køber ikke bærer transportomkostningerne. Forstyrrelser i driften, der påvirker os eller nogen af vores leverandører, mangel på egnet personale, strejke, lockout og force majeure udgør grunde til at udvide leveringsfristen og frigør os fra enhver leveringsforpligtelse i den periode, hindringen forekommer.

Returnering af varer

Returnering af varer skal ske inden 30 dage efter købsdato. Returnering uden for garantibetingelserne accepteres kun efter forudgående meddelelse til Bauerfeind og godkendelse af denne ang. returneringen, forudsat at leveringsdokumenterne er indsendt. Det forudsættes, at de returnerede varer er i uskadet og gensalgsbar stand. Vi forbeholder os ret til at afvise modtagelse af returnerede sendinger. Vi opkræver et administrationsgebyr på 150 kr. for hver sending, der returneres uden for garantiperioden. Administrationsgebyret for varer, der returneres 1 måned eller mere efter leveringsdatoen, er yderligere 20 procent af nettobestillingsværdien, dog højst 200 kr. pr. vare eller enhed. Gebyret er derudover 40 procent af nettobestillingsværdien af varer, der returneres mellem 6 måneder og 12 måneder efter leveringsdatoen, med forbehold for et maksimumgebyr på 50 euro for hver artikel eller enhed. Varer, der returneres uden for garantien, specialfremstillede produkter, og 12 måneder eller mere efter leveringsdatoen, tages ikke retur.

Betaling

skal ske umiddelbart efter modtagelse af fakturaen. Første levering sker kun mod forudbetaling. Hvis kunden misligholder en betalingsaftale, foretages yderligere levering kun mod forudbetaling. Restancer pålægges en rente 8 procent over den gældende basisrente fra det tidspunkt, hvor betalingen er forsinket. Betaling med check, bankoverførsel osv. anses for at være foretaget, når beløbet endeligt er krediteret vores konto.

Ejendomsforbehold

Vi beholder ejendomsretten til alle leverede varer, indtil køber har betalt alle udestående beløb i forbindelse med vores forretningsforbindelser med ham. Ejendomsforbeholdet gælder også forholdsmæssigt for varer, der er forarbejdet eller på anden måde ændret. Hvis varerne sælges, anses alle krav til tredjepart som overdraget til os uden forbehold op til det samlede beløb, vi har til gode. Uanset overdragelsen har køber ret til at opkræve disse beløb. Vores ret til at opkræve beløbene påvirkes ikke af den foregående bestemmelse. Vi forpligter os imidlertid til at afstå fra inddrivelse, medmindre køber misligholder betalingsaftalen. Hvis køber misligholder betalingsaftalen, kan vi kræve, at køber videregiver de tildelte fordringer og navnene på debitorerne, udleverer alle oplysninger, der kræves til inddrivelse af gælden, leverer alle nødvendige dokumenter og informerer debitorerne (tredjepart) om overdragelsen. Køber har ikke tilladelse til at sælge, forpligte eller overdrage varerne som sikkerhed. Forpligtelse, konfiskation eller anden begrænsning truffet af tredjepart skal straks meddeles os af køber, og han skal udlevere alle oplysninger

og dokumenter til os for at gøre det muligt for os at forsvare vores rettigheder. Vi forpligter os til på købers anmodning at frigive eventuel sikkerhed, der overstiger et sikret krav, der ikke er opfyldt med mere end 20 procent.

Klager

Garantikrav på grund af åbenlyse mangler udløber, medmindre vi straks underrettes skriftligt i henhold til artikel 377 HGB (den tyske handelslov-bog). For andre krav er tidsfristen for garantikrav 1 år efter levering af de købte varer. Hvis varerne er defekte, foretager vi udskiftning eller reparation af varerne efter vores valg. Af hygiejnehensyn kan reparationer kun udføres på vaskede varer og varer, der er i god hygiejnisk stand. Vi forbeholder os ret til at opkræve et passende administrationsgebyr ved returnering af uvaskede varer. Hvis og i det omfang vi opfylder vores forpligtelser til supplerende indsats, især reparation af mangler eller levering af varer uden mangler, kan kunden ikke kræve en prisnedsættelse eller ophæve kontrakten, medmindre vores forsøg på supplerende indsats mislykkes. Mangler, der skyldes normalt slid, overdreven belastning, forkert brug, manglende pleje eller manglende overholdelse af brugsanvisningen er ikke omfattet af garantien.

Ansvar

for skader er udelukket, medmindre vi eller vores medhjælpere ved opfyldelse af retshandelen viser sig at have handlet groft uagtsomt eller med forsæt. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for skader på grund af skade på liv, legeme eller helbred eller overtrædelse af en alvorlig kontraktlig forpligtelse.

Værneting

Opfyldelsesstedet er denne virksomheds forretningssted. Værnetinget for alle tvister med forretningsforbindelser er Gera.


Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser skulle være eller blive ugyldig eller umulig at håndhæve, påvirkes de øvrige bestemmelser ikke af dette. Den ugyldige bestemmelse eller en bestemmelse, der ikke kan håndhæves, erstattes af en gyldig bestemmelse eller en retskraftig bestemmelse, der afspejler parternes oprindelige hensigt så nøjagtigt som muligt.

Databeskyttelsesklausul/optagelse af opkald

Til kvalitetsmæssige formål registrerer vi tilfældigt samtaler mellem køber og vores medarbejdere. Telefonoptagelserne tjener udelukkende til at forbedre vores præstation og slettes efter evaluering. Data vil ikke blive videregivet til tredjepart. Køber giver hermed samtykke til optagelser af telefonopkald til dette ene formål. Samtykke er frivillig og kan tilbagekaldes når som helst i fremtiden af køber.

Seneste udgave: februar 2016

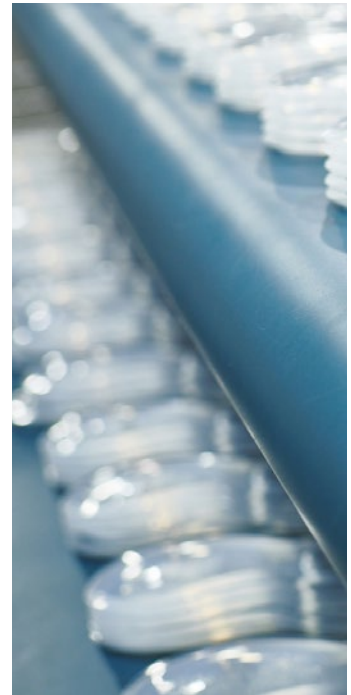

INDHOLD

BAUERFEIND- PRODUKTEGENSKABER

MERE FUNKTION,
KVALITET OG BRUGSKOMFORT

> Side 6

DE NYE TRAIN-BANDAGER

MÅLESTOKKEN FOR
FREMTIDEN

> Side 8

ET PASSENDE
PRODUKT TIL ALLE
BEHANDLINGS-
OMRÅDER



FOD OG ANKEL

12 Indikationstabel

- 14 MalleoTrain®
- 15 MalleoTrain® S
- 16 MalleoTrain® S open heel
- 17 MalleoTrain® Plus
- 18 AchilloTrain®
- 19 AchilloTrain® Pro
- 20 AirLoc®
- 21 MalleoLoc® L
- 22 MalleoLoc® L3
- 24 MalleoLoc®
- 25 CaligaLoc®
- 26 ValguLoc®
- 27 ValguLoc® II

YDERLIGERE PRODUKT-
OPLYSNINGER OG
SERVICEYDELSER

TILBEHØR OG RESERVEDELE

- 102 Fod og ankel
- 104 Knæ, lår og hofte
- 106 Rygsøjle og hals
- 110 Hånd, albue og skulder



KNÆ, LÅR OG HOFTE

30 Indikationstabel

- 32 GenuTrain®
- 34 GenuTrain® A3
- 35 GenuTrain® P3
- 36 GenuTrain® S
- 37 GenuTrain® S Pro
- 38 GenuPoint®
- 39 SofTec® Genu
- 40 SecuTec® Genu
- 42 GenuTrain® OA
- 44 SofTec® OA
- 45 SecuTec® OA
- 46 MOS-Genu
- 47 GenuLoc®
- 48 CoxaTrain®
- 50 MyoTrain®
- 51 SofTec® Coxa



RYGSØJLE OG HALS

54 Indikationstabel

- 56 LumboTrain® | Lady
- 58 SacroLoc®
- 60 LordoLoc®
- 61 LumboLoc®
- 62 LumboLoc® Forte
- 63 Spinoval®-System
- 66 Spinoval® Stabi Classic
- 67 Spinoval® Support Plus
- 68 Spinoval® Support Plus Classic
- 69 Spinoval® Unload Classic
- 70 Spinoval® Unload Plus
- 71 Spinoval® Immo Plus
- 72 Spinoval® Immo Plus Classic
- 73 Spinoval® Immo
- 74 SecuTec® Dorso
- 75 SecuTec® Lumbo
- 76 SofTec® Lumbo
- 77 DorsoTrain®
- 78 Spinoval® Osteo
- 80 SofTec® Dorso
- 81 CerviLoc® | CerviLoc® S



HÅND, ALBUE OG SKULDER

84 Indikationstabel

- 86 ManuTrain®
- 87 ManuLoc®
- 88 ManuLoc® long
- 89 ManuLoc® long Plus
- 90 RhizoLoc®
- 91 ManuLoc® Rhizo
- 92 ManuLoc® Rhizo long
- 93 ManuLoc® Rhizo long Plus
- 94 EpiTrain®
- 95 EpiPoint®
- 96 OmoTrain®
- 97 OmoTrain® S
- 98 OmoLoc®
- 99 SecuTec® Omo

EFTER MÅL OG SERIEFREMSTILLET

- 114 Bestillingsark til fremstilling efter mål
- 121 Bestillingsark til seriebestillinger
- 122 Bauerfeind-måleteknologi

BAUERFEIND- PRODUKTEGENSKABER


MERE FUNKTION, KVALITET OG BRUGSKOMFORT

Bauerfeind har i 90 år stået for uovertruffen kvalitet og fremragende behandling.

Få mere at vide om avanceret knowhow og produktenskabere af høj kvalitet, som gælder for hele vores sortiment.

+ TRAIN-STRIKMATERIALE

Det åndbare materiales tredimensionale overflade muliggør en konstant mikrocirkulation og skiftende kompression under bevægelsen. Derved kan smerter lindres og ødemer reduceres hurtigere. Bevægelser og stillinger opretholdes og stimuleres via bandagen gennem passende muskelaktivitet. Train-strikmaterialet sidder perfekt og består af forskellige kompressionszoner, der giver forbedret aktivering, komfort og klima.

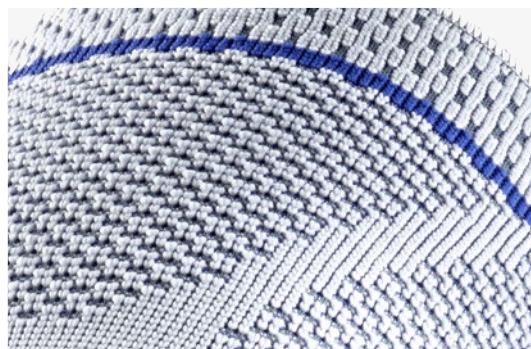

+ KOMFORTZONE

På særligt følsomme områder af kroppen, såsom i bøjninger, knogle fremspring eller på kantområder, tilbyder vi ekstra elastisk materiale for mere komfort, minimalt tryk og lettere af- og påtagning.



+ HUDVENLIG OG ÅNDBAR

Det er meget vigtigt for os at imødekomme mange brugeres ønsker om særligt hudvenlige produkter. Derfor udvikler vi materialer, der er behagelige og åndbare på huden og tilmed er skridsikre.



+ NEM HÅNDTERING

Vi lægger vægt på let påtagning og energibesparende håndtering af vores produkter. Til dette integrerer vi individuelle behandlingsløsninger, såsom hjælp til påtagning, der ligger godt i hånden, praktiske håndstropper, specielle lynlåse, fleksible velcrobånd eller individuelle lukningssystemer.



+ TILPASNING UDEN VÆRKTØJ

Til optimal tilpasning til individuelle behov kan du forme eller justere mange af vores komponenter, såsom aluminiumsstativer eller led, uden værktøj. Hurtig service og ukompliceret håndtering giver stor kundetilfredshed og tidsbesparelse.



+ BEHANDLING I FLERE TRIN

Det modulære design af moderne ortoser tillader gennem tilføjelse eller fjernelse af funktionelle elementer en behandling i flere trin, afhængig af den krævede stabilisering og den ønskede mobilisering.



+ DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE

Talrige kliniske studier fra uafhængige institutter har vist den medicinske effekt og effektivitet af vores produkters innovative materialer, komponenter og procedurer. Lær mere om de seneste studieresultater fra din Bauerfeind-repræsentant.



+ DIGITAL MÅLING

Bauerfeind giver med den avancerede BODYTRONIC måltagningsteknologi mulighed for at tilpasse bandager, kompressionsstrømper, indlæg og sko til den enkelte bruger. Derved opnår man en perfekt pasform, stor komfort og fuldt udbytte af den medicinske virkning – og dermed en behandling af høj kvalitet.



DE NYE TRAIN-BANDAGER FREMTIDENS STANDARD

FÆRRE SMERTER OG MERE LEDSTABILITET


er de behandlingsmæssige mål for medicinske bandager. Men en bandage kan kun hjælpe optimalt, hvis den sidder godt og er behagelig at have på. Den skal stå sin prøve hver dag, for:

DET LÆGGER PATIENTER VÆGT PÅ, NÅR DE KØBER EN BANDAGE*


Bauerfeind har altid handlet ud fra disse aspekter.

De nye Train-bandager


EFFEKT, BRUGSKOMFORT OG HÅNDTERING – NU ENDNU MERE OVERBEVISENDE.

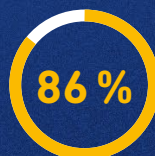

Behagelig
at have på

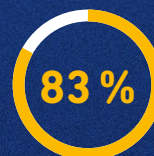

Let og
ukompliceret at
tage af og på

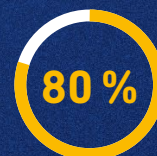

En følelse af
sikkerhed og
stabilitet



LINDRER SMERTER EFFEKTIVT DE NYE TO-KOMPONENT- PELOTTER

- Pelotter aflaster og reducerer smerter
- Innovative massageknopper i en anden komponent stimulerer nu endnu mere intensivt og giver en varig effekt

LETTER PÅ- OG AFTAGNING DE NYE PLASTSTIVERE

- Behagelig påtagnings- og aftagningshjælp
- Robust og meget fleksibelt plastmateriale
- Fleksibel bøjesezone til perfekt pasform





»PASFORMEN ER ENESTÅENDE«

Strikmaterialets tredimensionelle, anatomiske grundform og høje elasticitet sikrer, at de nye Train-bandager sidder optimalt ved bevægelse og dermed kan udfolde deres fulde effekt.

Birgit Görnert,
Leder af global produktstyring

VIRKER INTENSIVT DET NYE BØLGESTRIKMATERIALE

+ STABILISERENDE OG SMERTELINDRENDE EFFEKT

Den stærkt strukturerede overflade skaber en særlig stimulerende massage og sidder mere sikkert end en glat overflade

+ SÆTTER GANG I STOFSKIFTET OG HELINGEN

Det komprimerende strikmateriale skaber ved bevægelse en velgørende massage med skiftende tryk

+ VIRKER GENNEM OPTIMAL PASFORM

Strikmaterialet er anatomisk formet og yderst elastisk, så det sidder sikkert

+ BEHAGELIG AT HAVE PÅ

På de følsomme dele af kroppen er strikmaterialet tyndere, strukturen mere luftig og kompressionen blidere

VELKENDT BAUERFEIND-KVALITET

KOMFORTABEL OG HOLDBAR

To bløde garner løber i modsat retning omkring vores elastiske strikkemateriale som et beskyttende hylster

BLØDE KANTER

Brede, trykminimerede kanter forhindrer ubehag og giver mulighed for frit stofskifte





TIL EN MÅLRETTET **ANKELLEDS- BEHANDLING**

FOD OG
ANKELKNÆ, LÅR OG
HOFTRYGSØJLE OG
HALSHÅND, ALBUE OG
SKULDERTILBEHØR OG
RESERVEDELEEFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

INDIKATIONSVEJLEDNING FOD OG ANKEL

PRODUKT	MalleoTrain®	MalleoTrain® S / S open heel	MalleoTrain® Plus	AchilloTrain®	AchilloTrain® Pro
					
PRODUKTKENDETEGN	Aflastning og stabilisering af anklen	Stabilisering af anklen ved hjælp af et funktionelt remsystem	Øget stabilisering og aflastning af anklen ved hjælp af et funktionelt remsystem	Aflastning af akillessenen med en hækile	Lindring af smerter i akillessenen med friktionspelotte
SIDE	14	15 + 16	17	18	19
INDIKATIONER					
Ledbåndssufficiens / instabilitet					
let	•	•	•		
middel					
svær					
Irritationstilstande (posttraumatisk / postoperativ)	•		•	•	•
Ledbåndsskader i ankelleddet (akut)					
Tidlig funktionel behandling	•		•		
Konservativ / postoperativ terapi	•		•		
Genoptræning / forebyggelse	•	•	•		
Sinus tarsi-syndrom / instabilitet i subtalar-leddet					
Tilbagefaldsprofylakse	•	•	•		
Artrose / arthritis	•				
Fibromyalgier	•				
Achillodynier				•	•
Haglunds hæl				•	•
Hallux valgus (konservativ / postoperativ)					

MalleoTrain®

Aflastning og stabilisering af anklen



Lateral pelotte



Medial pelotte



Pelotte tilpasset indvendig og udvendig ankelkno

INDIKATIONER

- Kroniske, posttraumatiske og postoperative irritationstilstande, f. eks. efter distorsioner
- Artrose og arthritis, blodansamlinger i leddene og hævelser
- Fibromyalgier
- Ledbåndsinsufficiens
- Tidlig funktionel / konservativ behandling
- Tilbagefaldsprofylakse

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Den doserede kompression fremskynder resorptionen af ødemer og hæmatomer
- Pelotterne bevirker en omfordeling af bandagens kompression fra de prominente malleoler til det omgivende bløddelsvæv
- Neuromuskulær ledstabilisering gennem kompression fra strikmateriale
- Under bevægelsen opstår en intermitterende kompression, der fremmer blodcirkulationen gennem ledkapslen og seneløjer
- Optimeret holdbarhed selv under høj belastning på grund af forstærkning af sømmen med et elastisk bånd

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan

Udførelser: højre, venstre

Ekstraudstyr:
Efter mål (beige, titan)

LEVERINGSOMFANG

Inklusiv hjælp til påtagning

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- 80 % af testpersonerne var
efter 14 dage fri for smerter

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omfang af smalben (i cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	110 1110 20*0 +0°

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1 – 6)

Efter mål: De nøjagtige målepunkter finder du på måleblokken eller i måleskemaet på side 119.

^A O'Hara J., Valle-Jones C. J., Walsh H., O'Hara H., Davey N. B., Hopkin-Richards H. and Butcher R. M.
Controlled trial of an ankle support (MalleoTrain) in acute ankle injuries, Br J Sp Med 1992; 26(3)



MalleoTrain® S

Stabilisering af anklen ved hjælp af et funktionelt remsystem



Remssystem viklet i ottetaller



Remssystem

INDIKATIONER

- Ledbåndsinsufficiens
- Supinationsprofylakse
- Lettere distorsioner

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabiliserer ankelledets bevægelsesniveauer og har en antistupatorisk effekt takket være et retrins-remssystem (elastisk, uelastisk, delvist elastisk)
- Fungerer som en funktionel taping af anklen og forbinder mellemfoden med det distale underben via en lodret ottetalsvikling
- Optimeret holdbarhed selv under høj belastning på grund af forstærkning af sømmen med et elastisk bånd
- Neuromuskulær ledstabilisering gennem strikket kompression

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: sort, titan

Udførelser: højre, venstre

LEVERINGSOMFANG

Inklusiv hjælp til påtagning

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omfang af smalben (i cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	110 1111 20*0 +0°

* = Farve (7) sort, (8) titan
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1 – 6)



MalleoTrain® S open heel


Stabilisering af anklen og forbedret kontakt med gulvet gennem åbent hælområde



Remssystem viklet i ottetaller



Remssystem

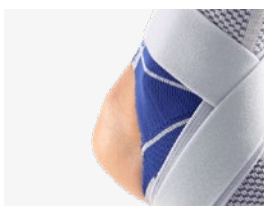

Åbent hælområde

INDIKATIONER

- Ledbåndsinsufficiens
- Supinationsprofylakse
- Lettere distorsioner

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabiliserer ankelledets bevægelsesniveauer og har en antisupinatorisk effekt takket være et tretrins-remssystem (elastisk, uelastisk, delvist elastisk)
- Fungerer som en funktionel taping af anklen og forbinder mellemfoden med det distale underben via en lodret ottetalsvikling
- Neuromuskulær ledstabilisering gennem kompression fra strikmaterialet
- Optimeret holdbarhed selv under høj belastning på grund af forstærkning af sømmen med et elastisk bånd
- Åbent hælområde for forbedret kontakt med gulvet

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, titan

Udførelser: højre, venstre

STØRRELSE	1	2	3	4	5	BESTILLINGS-NR.
Omfang af smalben (i cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	110 1115 00*0 +0°

* = Farve (1) beige, (8) titan
 + = Udførelse (6) højre, (7) venstre
 ° = Størrelse (1–5)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s-open-heel



MalleoTrain® Plus

Øget stabilisering og aflastning af anklen ved hjælp af et funktionelt remsystem



Lateral pelotte



Medial pelotte



Remsystem viklet i ottetaller



Remsystem

INDIKATIONER

- Kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande
- Postoperativ genoptræning
- Tidlig funktionel behandling af ledbåndsskader i øverste eller nederste ankelled
- Ledbåndinsufficiens / instabilitet
- Supinationsprofylakse, især ved øget fysisk aktivitet

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabiliserer ankelledets bevægelsesniveauer og har en antisupinatorisk effekt takket være et tretrins-remsystem (elastisk, uelastisk, delvist elastisk)
- Fungerer som en funktionel taping af anklen og forbinder mellemfoden med det distale underben via en lodret ottetalsvikling
- Yderligere stabilitet gennem mediale og laterale pelotter, som omslutes tæt af ottetalsremmen
- Neuromuskulær ledstabilisering gennem kompression fra strikmaterialet
- Optimeret holdbarhed selv under høj belastning på grund af forstærkning af sømmen med et elastisk bånd

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

LEVERINGSOMFANG

Inklusiv hjælp til påtagning

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omfang af smalben (icm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29	110 1112 0080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1–6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-plus




AchilloTrain®

Aflastning af akillessenen med en hækile



Integreret hækile

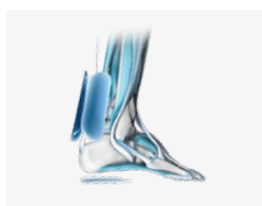

Pelotte langs med akillessenen



Pelotte



Udligningspude

INDIKATIONER

- Achillodynii (tendinose, paratendinitis, bursitis subachillea)
- Haglunds hæl
- Kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande, f.eks. ved ruptur af akillessenen

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Pelotten giver en ensartet trykindføring og forårsager ved bevægelse en massagevirkning hvor stofskiftet forbedres lokalt og ødemer reduceres
- Den integrerede senepelotte er viskoelastisk og anatomisk formet
- Den aftagelige, integrerede viskoelastiske hækile (6 mm høj) aflaster akillessenen
- Ved at påvirke proprioception understøttes en koordineret muskelstyring

BRUGSANVISNING

- Hvis hækilen sættes i, skal udligningspuden på den modsatte side også anvendes

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele: se side 102 og prisliste

LEVERINGSOMFANG

Inklusiv hjælp til påtagning

Inklusiv udligningspude en separat hælpudd til længdekompensation af den modsatte side

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omfang af smalben (icm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	110 1101 30*0 +0°

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre


° = Størrelse (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain




AchilloTrain® Pro

Lindring af smerter i akillessenen med friktionspelotte

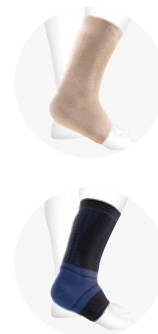

Friktionspelotte

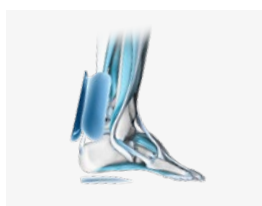

Friktionspelotte langs med akillessenen

INDIKATIONER

- Achillodynii (tendinose, paratendinitis, bursitis subachillea)
- Haglunds hæl
- Kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande, f.eks. ved ruptur af akillessenen
- Betændelsestilstande i akillessenen

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Pelottens to vinger strækker sig til starten af lægmuskelsen og stimulerer den øverste tredjedel af senen og de »neuromuskulære spindler« (muskelreceptorer) i overgangen mellem muskel og sene.
- Pelottens nopper, der er rettet indad, udfører en smertelindrende friktionsmassage, dette forbedrer proprioceptionen og dermed bevægelsesprocessen
- Langsgående riller hjælper med lymfedræningen. På samme tid fører pelottens kanal akillessenen til dens anatomiske glidebane

BRUGSANVISNING

- Om nødvendigt anbefales, at hælen løftes med en støddæmpende hælpude

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan

Udførelser: Samme udførelse til højre og venstre side

LEVERINGSOMFANG

Inklusiv hjælp til påtagning

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omfang af smalben (icm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	110 1105 10*0 00°

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan
° = Størrelse (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain-pro



FOD OG ANKEL

KNÆ, LÅR OG HOFTE

RYGSØJLE OG HALS

HÅND, ALBUE OG SKULDER

TILBEHØR OG RESERVEDELE

EFTER MÅL OG SERIEFREMSTILLET

AirLoc®

Stabilisering af det øvre ankelled med justerbar luftpolstring



Justerbar luftpolstring



Elastisk skålforbindelse

INDIKATIONER

- Behandling ved ledbrudsskader i ankelledet (akut)
- Tidlig funktionel / konservativ behandling, f.eks. efter ankelledsdistorsioner og ledbrudsrupturer
- Postoperativ genoptræning / beskyttelse, f.eks. efter syning / rekonstruktion af ledbrud
- Kronisk ledbrudsinsufficiens / instabilitet
- Tilbagefaldsprofylakse

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabilisering af ankelledet gennem anatomisk formede plastskaller som modvirker vrid på foden (især sammen med fodtøjet)
- Ideel pasform og meget god tilpasning til den respektive hævelsestilstand på grund af oppustelig luftpolstring
- Muliggør optimal tilpasning til den individuelle fodbredde og graden af hævelse ved hjælp af en elastisk skålforbindelse
- Individuel påtagning takket være fire justerbare velcrobånd

BRUGSANVISNING

- Individuel justering af luftpolstringen ved hjælp af den medfølgende pumpe

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Tilpasning uden værktøj

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Størrelse: universal

Tilbehør / reservedele: se side 102 og prislister

LEVERINGSOMFANG

Inkl. pumpe

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **34 % færre komplikationer** i behandlingen af ankelledet sammenlignet med sportstape

STØRRELSE

Fås i en universalstørrelse

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

BESTILLINGS-NR.

120 1303 1080 +00

^A Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.:

The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; <http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81>

MalleoLoc® L

Lateral stabilisering af ankelledet



Plantar-pelotte



Mikrofiber-polstringsmateriale



Plantar-pelotte L-skål



Passer til hverdags- og business-sko

INDIKATIONER

- Konservativ behandling af distorsioner og ledbåndrupturer
- Akut og kronisk instabilitet af ledkapslen
- Profylakse ved kronisk instabile ledbånd
- Postoperativ genoptræning / beskyttelse, f. eks. efter syning / rekonstruktion af ledbånd
- Posttraumatiske / postoperative irritationstilstande

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabiliserer foden i skoen og beskytter mod vrid på anklen, uden at føddernes naturlige gangcyklus begrænses
- L-skålen ligger foran talus og modvirker en talusfremskydning.
- Individuelt placerbar plantar-pelotte (ekstraudstyr) stimulerer dorsalfleksionen til yderligere aktiv stabilisering
- Behagelig bærekomfort takket være den bløde mikrofiber-polstring

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Tilpasning uden værktøj

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Størrelse: universal

Tilbehør / reservedele: se side 102 og prisliste

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ

- **Modvirker vrid**

STØRRELSE

Fås i en universalstørrelse

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

^Δ Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., laboratoriestudie:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus;
Orthopädieschuhtechnik, udg. 10, S. 26–29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l

BESTILLINGS-NR.

120 1326 1080 +00

MalleoLoc® L3

Lateral stabilisering af ankelledet
– kan anvendes i tre trin





Behandlingsløsning for tre stabilitetsbehov

Lynlås

Passer til hverdags- og business-sko

INDIKATIONER

- Konservativ behandling af distorsioner og ledbrådsrupturer
- Akut og kronisk instabilitet af ledkapslen
- Profylakse ved kronisk instabile ledbråds
- Postoperativ genoptræning / beskyttelse, f. eks. efter syning / rekonstruktion af ledbråds
- Posttraumatiske / postoperative irritationstilstande

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Afmonterbar ortose som kan følge patienten under et behandlingsforløb med tre forskellige løsninger alt efter stabilitetsbehov i henhold til helingsprocessen
- Bandagens kompression af bløddelen fremskynder reduktion af hævelser, forbedrer proprioceptionen og har en muskelaktiverende virkning
- Stabiliserer foden sideværts i skoen og forhindrer anklen i at vrikke om på siden uden at begrænse føddernes naturlige gangcyklus
- L-skålen ligger foran talus og modvirker en talusfremskydning
- Lynlås for nem påsætning af bandagen

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj
- + Behandling i flere trin

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele: se side 102 og prislister

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **Modvirker vrid**

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omfang af smalben (i cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	120 1327 1080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (1 – 6)

^A Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., laboratoriestudie:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopädieschuhtechnik, udg. 10, S. 26 – 29, 2018



MalleoLoc®

Øget stabilisering af øvre og nedre ankelled



Plantartunge



Anatomisk formet, bilateralt stabiliseringsselement

INDIKATIONER

- Tidlig funktionel / konservativ behandling ved ledbåndsskader og skader i lig. bifurcatum, f.eks. efter distorsioner og ledbåndsrupturer
- Postoperativ beskyttelse efter syning / rekonstruktion af ledbånd
- Kronisk ledbåndinsufficiens
- Tilbagefaldsprofylakse
- Prævention mod distorsioner f.eks. i forbindelse med sport

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabiliserer foden og beskytter mod vrid på anklen
- Giver mulighed for plantarfleksion og dorsalfleksion og modvirker et samtidig talusfremskydning og begrænser ikke »normal« gang
- Aktiverer dorsalfleksionen via en plantartunge og understøtter således ortosens stabiliserende virkning og supinationsbeskyttelse

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Tilpasning uden værktøj
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele: se side 103 og prisliste


DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ

- **Modvirker vrid**

STØRRELSE	1 (NORMAL)	2 (BRED)	BESTILLINGS-NR.
Hælens bredde (cm)	< 6	> 6	120 1301 3080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (1–2)

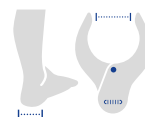


^Δ Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking. Gait & Posture 2014; 39 (3), 894–898.

CaligaLoc®

Stabilisering af øvre og nedre ankelled
efter svære skader



Pronationskile til lindring af de laterale ledbåndsstrukturer

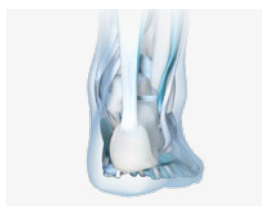

Fodstilling uden pronationskile



Fodstilling med pronationskile



Medial visning

INDIKATIONER

- Konservativ behandling af alvorlige ankelledsskader
- Postoperativ beskyttelse efter syning / rekonstruktion af ledbånd
- Kronisk instabilitet i det øvre og / eller nederste ankelled med kontraindikationer for operation
- Posttraumatisk sinus-tarsi-syndrom og dekompenaseret instabilitet i subtalarleddet, også midlertidig stabiliseringshjælp

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Forhindrer ufysiologiske stresssituationer for det øvre og delvis også det nedre ankelled
- Løftning af bagfodens ydre kant og aflastning af det laterale ledbåndsapparat med en integreret pronationskile
- De anatomisk formede velcroremme sikrer en nem og hurtig påtagning og yderligere komfort
- Ortozen kan bruges hele døgnet rundt, som støtteskinne i sko og som natskinne uden sko

BRUGSANVISNING

- Individuel justering ved udskæring af polstringen i tilfælde af stærk hævelse takket være udsparingen i området omkring den udvendige ankelkno

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Tilpasning uden værktøj
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **23,3 dage tidligere tilbage på jobbet** sammenlignet med gips

STØRRELSE

Vejledende værdi skostørrelse

1

34 – 38

2

39 – 43

3

44 – 48

BESTILLINGS-NR.

120 1300 4080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (1–3)

^A Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt: 5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Aug. 114, S. 122–126, 1994 © Gentner Verlag Stuttgart

ValguLoc®

Korrektion af storetåen i hvile



Hvileskinne

INDIKATION

- Hallux valgus (konservativ og postoperativ)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Korrigerer storetåens fejlstilling og udvider forkortede kapseldele eller blødt væv
- Korrektionstab (f.eks. på grund af ardannelse) kan undgås postoperativt, og forskallingen giver storetåen en vis beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
- Trinløst justerbart korrektionstryk med velcrolukning
- Behagelig at have på takket være blødt rem- og polstringsmateriale
- ValguLoc er ikke egnet til sko og er ikke egnet til at gå med

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Tilpasning uden værktøj
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele: se side 103 og prisliste

STØRRELSE

	1	2	3		BESTILLINGS-NR.
Vejledende værdi skostørrelse	34 – 36	37 – 40	41 – 46		120 1310 2080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/valguloc

ValguLoc® II

Korrektion af storetåen i hvile og bevægelse



Multidimensionelt led til justering af abduktions- og adduktionsvinkel



Fri mobilitet af storetåens grundled eller fiksering i justerbare bøjnings- og forlængelsesvinkler

INDIKATIONER

- Postoperativ beskyttelse / genoptræning efter Hallux valgus-operation
- Konservativ-funktionel behandling ved hallux med mobiliseringsfunktion

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Individuel indstilling af storetåens korrektionsvinkel takket være et tredimensionelt justerbart led
- Kan tilpasses den individuelle fodform, trinvis låsning til postoperativ skinnepåsætning / immobilisering af storetåens grundled
- Trykaflastning af storetåens grundled ved korrektion
- Passer i brede almindelige sko ved flad monteringshøjde
- Muliggør fodens naturlige gangbevægelser

BAUERFEIND PLUS

+ Nem håndtering

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: Samme model til venstre og højre

Størrelse: universal

Tilbehør / reservedele: se side 103 og prislister

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **92 % af patienterne bedømmer brugskomforten som værende god og meget god**

STØRRELSE

Fås i en universalstørrelse

BESTILLINGS-NR.

120 1316 0050 000

^A Nicht-interventionelle Studie 2012, Handhabung und Compliance der Hallux-valgus-Orthese ValguLoc II; interne data, Bauerfeind AG



TIL MÅLRETTET **KNÆBEHANDLING**

Model bærer knæortosen GenuTrain® OA.

FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSKILLER

INDIKATIONSVEJLEDNING KNÆ, LÅR OG HOFTE

PRODUKT	GenuTrain®	GenuTrain® A3	GenuTrain® P3	GenuTrain® S	GenuTrain® S Pro	GenuPoint®	SofTec® Genu
							
PRODUKTKENDETEGN	Aflastning, stabilisering og aktivering af knæleddet	Aktivisering og stabilisering ved komplekse knæproblemer som f.eks. slidgigt	Centrering, sikring og aflastning af patella	Forstærket stabilisering af knæleddet ved hjælp af sideledskinner	Forstærket stabilisering af knæleddet ved hjælp af sideledskinner med bevægelsesbegrænsning	Måltrettet aflastning af patellasenen	Aktiv og passiv stabilisering af knæleddet – ideel til langtidsbehandling
SIDE	32	34	35	36	37	38	39
INDIKATIONER							
Irritationstilstande (posttraumatisk / postoperativ)	•	•	•			•	
Recidiverende ledeffusion	•	•					
Patellalateralisation		•	•				
Patellofemoralt smertesyndrom			•			•	
Instabilitet	let til middel	•	•	•	•		
	svær til kompleks						•
	funktionel, f.eks. ikke-coper						•
Meniskuskader	•				•		•
Sideledbåndsskader							•
Ruptur forreste / bageste korsbånd (ACL / PCL)							•
Gonartrose / arthritis	let til middel	•		•	•		
	middel til svær						
Tilstand efter bruskt transplantation							
Patellafraktur (konservativ eller postoperativ)							
Genu recurvatum (med korsrem)							
Omstillingsosteotomi							
Immobilisering af knæ							
Muskelskade							
Forebyggelse / tilbagefaldsprofylakse	•		•	•	•		•
Coxartrose							
Hofteledsluksation							
Efter endoproteese / erstatningsproteser / genopbyggende plastikkirurgi							
Muskulær dysbalance lænd-bækken-hofte-regionen							
Muskulære problemer efter ledoperation hofte							
Impingement af hofteled							
Instabilitet af hofteledet (iht. T.E.P., efter revisionsindgreb)							
Instabilitetsfølelse i hoften							
Løsning af hofteprotese, hvis operation ikke er mulig							

GenuTrain®

Aflastning, stabilisering og aktivering af
knæleddet

DEN NYE
GENERATION






Omega+ pelotte



Train-strikmateriale



Integreret på- og aftagningshjælp

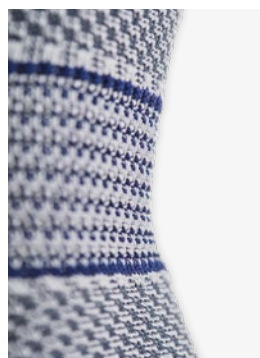

Komfortabel knæhase



Comfort-størrelser

INDIKATIONER

- Tendinopati, tendomyopati, ligamentose, meniskirritation, kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande
- Recidiverende ledeffusion
- Gonartrose / artrit (slidigt / ledbetændelse)
- Forebyggelse / tilbagefalds-profylakse
- Instabilitetsfølelse

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- 89 % af deltagerne oplevede **større stabilitet i knæledet**
- Målbart **mindre belastning af knæledet**
- Dokumenteret **reduktion af smerter** ved brug af bandagen

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Dokumenteret aflastning og stabilisering af knæledet takket være den målrettede aktivering af den ledstabiliserende muskulatur
- Massage af meniskerne gennem pelottens indlagte meniskvinger, som virker smertereducerende
- Fremmer knæets stofskifte og selvhelingsevne gennem stimulerende virkning af Hoffa-spots på Hoffa-legemet
- Komplex stimulering af mekanosensorer forbedrer koordination, sansemotorik og det fysiologiske bevægelsesforløb
- Forbedring af bevægeligheden gennem massage af spændte muskler, sener og fascier
- Fremskynder resorptionen af ødemer og blodansamlinger og understøtter helingsforløbet ved irritationstilstande
- De åndbare aktive zoner og særligt bløde komfortzoner i det anatomisk formede Train-strikmateriale sørger for fremragende bærekraft ved optimal medicinsk virkning

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Komfortzone
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan

Udførelser: Samme udførelse til højre og venstre side

Ekstraudstyr:

Silikonisering:
Standard-størrelser (sort, titan),
Comfort-størrelser (beige, sort, titan)

Efter mål (beige, titan):
Silikonebånd, ekstra hjælp til påtagning, velcrolukning

Tilbehør / reservedele:

Nopret hæftebånd (titan),
se side 104 og prislister


STØRRELSE		0	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Standard	Omkreds foroven (cm)	35–38	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59	110 4120 60*▲00°
	Omkreds forneden (cm)	25–28	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	
Comfort	Omkreds foroven (cm)				47–50	50–53	53–56	56–59	59–62	110 4120 60*▲08°
	Omkreds forneden (cm)				34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan

▲ = Silikonisering (0) uden, (9) med (kun titan og sort, Comfort-størrelser også beige)

° = Størrelse (0–7)


Efter mål: De nøjagtige målepunkter finder du på måleblokken eller i måleskemaet på side 115.

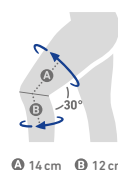


^A Schween R, Gehring D, Gollhofer A. »Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis«. PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371 / journal.pone.0115782. eCollection 2015.

GenuTrain® A3

Aktivering og stabilisering ved komplekse knæproblemer som f.eks. slidgigt

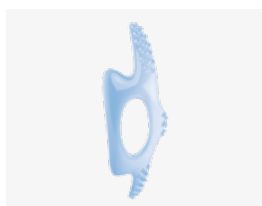

Patellapelotte med friktionszoner

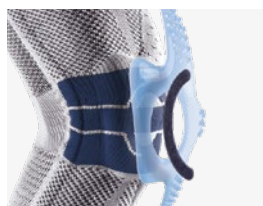

Indbygget justeringsbånd til stabilisering af patella



Elastisk zone i underbenet



Silikonisering

INDIKATIONER

- Gonartrose og arthritis, kroniske, posttraumatiske og postoperative irritationstilstande, ligamentoser og fibromyalgi
- Knæsmærter ved funktionel instabilitet som følge af muskulære dysbalancer
- Recidiverende ledeffusion
- Forebyggelse / tilbagefalds-profylakse
- Patellalateralisation

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Reduktion af smerter grundet den målrettede effekt af den anatomisk formede pelotte med friktionszoner
- Aktivering af den ledstabiliserende muskulatur og forbedring af koordination gennem stimulering af mekanoreceptorerne i huden og i overgangen mellem muskel og sene
- Hurtigere heling af komplekse knæproblemer gennem massage med skiftende tryk under bevægelse. Dette minimerer dannelsen af ødemer og resorption af blodansamlinger
- Lettere af- og påtagning af bandagen på grund af en unik elastisk zone i underbenet
- Maksimal bærekraft gennem trykminimerede kantområder, den særligt bløde knæhase og Train-strikmaterialets fugtregulerende egenskaber

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Komfortzone
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, titan

Udførelser: højre, venstre

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ


- Smertefri gang:
Forlængelse af gangdistancen uden smerter med 2,4 gange

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds foroven (cm)	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	110 4125 10*0 +0°
Omkreds forneden (cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	

* = Farve (1) beige, (8) titan

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (1-6)

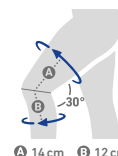

A 14 cm B 12 cm


^Δ Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

GenuTrain® P3

Centrering, sikring og aflastning af patella





Patellapelotte

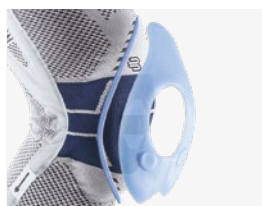

Justeringsbånd



Muskelaflappende pelotte



INDIKATIONER

- Patellalateralisation
- Højtstående patella (patella alta)
- Efter lateral-release-operation
- Irritationstilstande i knæledet, (patellofemoralt smertesyndrom, patellar chondropati, chondromalacia patellae, patellar tendinitis / springerknæ, løberknæ)
- Instabilitetsfølelse

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Centrering og beskyttelse af patella i dens fysiologiske bevægebane med den anatomisk formede pelotte og individuelt tilpasseligt justeringsbånd, som forhindrer en lateral forskydning af patella.
- Friktionspunkter på det distale pelotteafsnit masserer Hoffa-legemet og har en trykaflastende og smertelindrende effekt
- Afslapning af Tractus iliotibialis og reduceret spænding af patella gennem den unikke muskelaflappende pelotte
- Forbedret proprioception gennem pelottevingen med proximal forlængelse på musculus vastus medialis
- Hurtigere resorption af ødemer og blodansamlinger gennem medicinsk effektiv kompression og massage med skiftende tryk under bevægelse

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Komfortzone
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan


Udførelser: højre, venstre

Ekstraudstyr:
Silikonisering (kun titan),
silikonebånd, efter mål (beige, titan)

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds foroven (cm)	39–42	42–45	45–48	48–51	51–54	54–57	110 4140 30*▲ +0°
Omkreds forneden (cm)	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan
▲ = Silikonisering (0) uden, (9) med (kun titan)
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1–6)

Efter mål: De nøjagtige målepunkter finder du på måleblokken eller i måleskemaet på side 116.

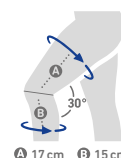

▲ 17 cm ● 15 cm

GenuTrain® S




Forstærket stabilisering af knæleddet ved hjælp af sideledskinner



Pelotte



Sideledskinner



INDIKATIONER

- Ledinstabilitet (let til middel grad)
- Arthrose (grad 1–3) med let valgus/varus deviation
- Arthritis (f.eks. rheumatoid arthritis)
- Stabile menisklæsioner

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Aflastning og føring af knæleddet etableres ved hjælp af ledskinnerne i kombination med det cirkulære remsystem på over- og underbenet
- Flad pasform og individuelt justerbar med velcrostrapper
- Stor bære komfort grundet det åndbare, fugtabsorberende Train-strikmateriale med specialvævet knæhase og trykminimerede kantområder
- Fremmer den neuromuskulære ledstabilisering ved at stimulere proprioceptionen
- Smertereduktion ved massage gennem skiftende tryk af de parapatellære bløddelsstrukturer i bevægelsen via den viskoelastiske pelotte
- Accelereret resorption af ødemer og hæmatomer gennem kompressions- og massageeffekt af det tætsiddende, elastiske strikmateriale

BRUGSANVISNING

- De anatomisk formede ledskinner kan formes termoplastisk og kan tilpasses den individuelle anatomi

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Komfortzone
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan

Udførelser: højre, venstre

Ekstraudstyr:

Silikonebånd, efter mål (beige, titan)

Tilbehør / reservedele:


se side 104 og prisliste

STØRRELSE

	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds foroven (cm)	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59	110 4130 40°0 +0°
Omkreds forneden (cm)	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan
 + = Udførelse (6) højre, (7) venstre
 ° = Størrelse (1–7)

Efter mål: De nøjagtige målepunkter finder du på måleblokken eller i måleskemaet på side 117.

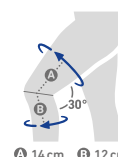


A 14 cm B 12 cm

GenuTrain® S Pro


Forstærket stabilisering af knæleddet ved hjælp af sideledskinner med bevægelsesbegrænsning





Pelotte

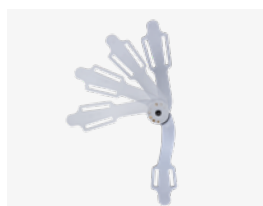

Begrænsning af knæfleksion

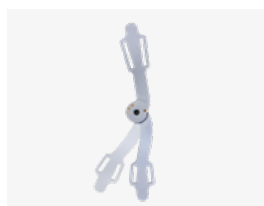

Begrænsning af knæekstension



INDIKATIONER

- Ledinstabilitet (let til middel grad)
- Arthrose (grad 1–3) med let valgus/varus deviation
- Arthritis (f.eks. rheumatoid arthritis)
- Meniskskader

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Egnat til begrænsning af knæets bevægelighed via ledskinnernes låsbare led
- Aflastning og føring af knæleddet etableres ved hjælp af ledskinnerne i kombination med det cirkulære remsystem på over- og underbenet
- Fremmer den neuromuskulære ledstabilisering ved at stimulere proprioceptionen
- Accelereret resorption af ødemer og hæmatomer gennem kompressions- og massageeffekt af det tætsiddende kompressionsstrikmateriale
- Flad pasform og individuelt justerbar med velcrostrapper
- Smertereduktion ved massage gennem skiftende tryk af de parapatellære bløddelsstrukturer i bevægelsen via den viskoelastiske pelotte

BRUGSANVISNING

- Fleksion og ekstension af knæleddet kan begrænses uafhængigt af hinanden (fleksion: 30°, 60°, 90°) (ekstension: 20°)
- De anatomisk formede ledskinner kan formes termoplastisk og kan tilpasses den individuelle anatomi

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan

Udførelser: højre, venstre

Ekstraudstyr:


Silikonebånd, efter mål (titan)

STØRRELSE

	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds foroven (cm)	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59	110 4135 00*0 +0°
Omkreds forneden (cm)	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1–7)

Efter mål: De nøjagtige målepunkter finder du på måleblokken eller i måleskemaet på side 118.

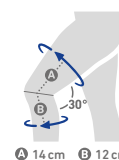

A 14 cm B 12 cm

GenuPoint®

Målrettet aflastning af patellasenen



Pelotte med friktionsnopper

INDIKATIONER

- Irritationstilstande i området omkring patellasenen (patellofemoralt smertesyndrom, patellar chondropati, patellar tendinitis / springerknæ)
- Smerter på forsiden af knæet (Hoffas fedtpudeirritation)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Føring og aflastning af patellasenen gennem præcis kompression
- Den viskoelastiske pelotte med effektive trykpunkter masserer smerteområderne, lindrer ubehag og forbedrer koordinationen
- Dynamisk tryktilpasning og behovsbaseret kompression gennem individuelt justerbar rem
- Maksimal bevægelsesfrihed gennem anatomisk form
- Samme udførelse til højre og venstre side

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: sort, titan

Udførelser: Samme udførelse til højre og venstre side

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ

- **Færre smerter og bedre proprioception**

STØRRELSE	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds (cm)	28 – 30	30 – 35	35 – 44	120 4240 00*0 00°

* = Farve (7) sort, (8) titan

° = Størrelse (1 – 3)


^Δ Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017

experts.bauerfeind.com/genupoint



SofTec® Genu

Aktiv og passiv stabilisering af knæleddet –
ideel til langtidsbehandling

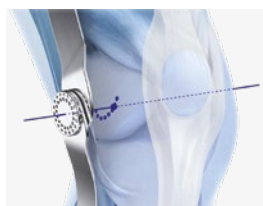

Automatisk justering af den individuelle kompromis-
omdrejningsakse



Stabil, cirkulær kompressiv kraft
efter fire-punkts princippet



Ledskiner i siden med låsbare led



Pelotte med indbygget
justeringsbånd

INDIKATIONER

- Ruptur af det forreste og / eller bageste korsbånd (ACL / PCL) til konservativ behandling, præ- og tidsforskuet postoperativ behandling, langtidsgenoptræning og ved kronisk insufficiens
- Svær og / eller kompleks instabilitet (traumatisk, degeneration; f.eks. »Unhappy Triad«)
- Sideledbåndsskader
- Funktionel instabilitet, f.eks. nedsat neuromuskulær kontrol
- Til begrænsning af bevægeområde (f.eks. efter meniskrefiksation eller meniskimplantering)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabilisering af knæleddet i henhold til firepunktsprincippet ved hjælp af trækstærk, uelastisk strikmaterial, sideledskinner og velcrobånd
- Undgåelse af skadelige tvang af knæleddet på grund af den tredimensionelle justering af ortoseleddene tilpasset den individuelle kompromisdrejeakse
- Automatisk justering af den individuelle kompromisomdrejningsakse
- Korrekt placering af SofTec Genu på benet ved hjælp af en patella-udsparring i pelotten
- Modvirker forskydning af patella via et integreret justeringsbånd i pelotten
- Permanent sikker pasform grundet anatomisk formede velcrostrapper

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: sort, titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele:
se side 104 og prislister

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **Mekanisk og neuromuskulær stabilisering af knæleddet**

BRUGSANVISNING

- Leddene kan begrænses til ekstension og fleksion i intervaller af 10°

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds foroven (cm)	38–42	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	
Omkreds midtfor (cm)	29–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47	122 4600 10*0 +0°
Omkreds forneden (cm)	28–32	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	
Ledbeskyttelse fås som tilbehør							129 4601 1070 000


* = Farve (7) sort, (8) titan

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (1–6)

^A Schwameder, H.; Sell, S.; Strutzenberger, G.: Effect of two different functional braces on laxity and functional achievements in patients with anterior cruciate ligament ruptures, submitted to: The American Journal of Sports Medicine

experts.bauerfeind.com/softec-genu

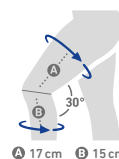

SecuTec® Genu

4-punkts ortose til stabilisering af knæleddet ved komplekse knæskader





Let påtagning forfra



Firepunktsprincippet ved skader på forreste (blå pile) eller bageste korsbånd (gule pile)



Stativer for lår / underben kan kombineres i forskellige størrelser



Ledlås



Indstilling af lægstrop

INDIKATIONER

- Ruptur af forreste og / eller bageste korsbånd (ACL / PCL)
- Efter ledbåndoperationer / rekonstruktion af ledbånd
- Alvorlige og / eller kompleks instabiliteter (traumatisk, degeneration; f. eks. »Unhappy Triad«)
- Sideledbåndsskader
- Til begrænsning af knæleddets bevægelighed (f. eks. efter meniskrefikseration eller meniskimplantering)
- Patellafraktur (konservativ og postoperativ)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Omfattende stabilisering af både en ACL-, PCL- eller kompleks ledbåndsskade opnås med seks remme i kombination med den stive rammekonstruktion efter firepunktsprincippet
- Kan let placeres og fikseres forfra af patienten, hvilket reducerer stresset på det skadede knæ
- Begrænser og immobiliserer leddet uden værktøj, hvor vinklen kan aflæses udefra
- Anatomisk korrekt og sikker pasform
- Ekstremt let, slank og stabil takket være stativets letmetal-legering
- Høj rotationsstabilitet ved hjælp af anatomisk formet rammekonstruktion inkl. tibiakantform

BRUGSANVISNING

- Fleksion og ekstension begrænses uafhængigt fra hinanden:
Fleksion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Immobilisering kan realiseres ved 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Tilpasning uden værktøj
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: blå, grøn

Udførelser: højre, venstre

Versjoner: samlet, delvist samlet, byggesæt

Kombination af over- og underbendel i to forskellige størrelser mulig (maksimal forskel: to størrelser) leveres som byggesæt

Tilbehør / reservedele:

se side 104 og prislister

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **Holder positionen, når man bevæger sig**

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7
Omkreds foroven (cm)	38–42	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	60–72
Omkreds forneden (cm)	28–32	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	46–51

KOMBINATIONER


Proksimal stativstørrelse	1	2	3	4	5	6	7
Distal stativstørrelse	1–3	1–4	1–5	2–6	3–7	4–7	5–7

** = farve (05) blå, (23) grøn
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1–7)

^ = proksimal stativstørrelse
> = distal stativstørrelse

BESTILLINGS-NR.

121 4614 0**0 +0°	SecuTec Genu
121 4619 0**0 +0°	delvist samlet
121 4647 0**0 +^>	Konstruktionssæt

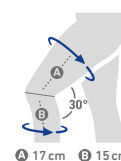

A 17 cm B 15 cm

^A Berschin et al.; Achsentraue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.

GenuTrain® OA

Målrettet aflastning og stabilisering for mere aktivitet ved slidgigt

NYHED






Innovativt aflastningssystem



Boa® Fit System

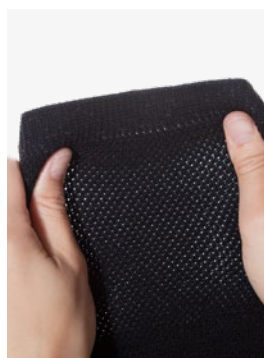

3D-netstrikmateriale



Bøjzone uden tryk



Store på- og aftagningsstropper

INDIKATIONER

- Medial eller lateral slidgigt
- Instabilitet (mediolateral)
- Brusk-knoglelæsion unikompartimentel
- Tilstand efter bruskkirurgi eller opbygning af brusk ved nødvendig ensidig, postoperativ aflastning
- Efter ensidige menisklæsioner
- Aseptisk knoglenekrose
- Dissekerende osteochondrose
- Bone Bruise (knogleødem i den mediale femurkondyl / tibiplateauet)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Følbar aflastning af den smertende knæside gennem det innovative aflastnings- og stabiliseringssystem med dens omløbende bånd efter tre-punkts-systemet
- Nem dosering af aflastningen via drejelukningen på Boa Fit-systemet – uden yderligere brug af burrelukninger
- Mere aktivitet takket være lille vægt og sikker positionering af benet
- Fleksibel ledskinne, dobbelt-8-strop og 3D-netstrikmateriale adresserer sansemotorikken og fremmer det naturlige bevægelsesmønster
- Behagelig at have på, også i længere perioder pga. det åndbare 3D-netstrikmateriale og den trykfri bøjzone i knæhasen
- Nem på- og aftagning med to stropper foroven og forneden på ortosen, der er nemme at få fat i

BRUGSANVISNING

- Individuel tilpasning af ledskinnen til patientens ben uden værktøj
- Nem håndtering af Boa Fit-systemet:
 - åbn drejelukningen, for at slække båndene og tage ortosen på eller af
 - Luk drejelukningen, og drej den til regulering af smerteaflastningen

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Tilpasning uden værktøj

VALGMULIGHEDER

Farver: sort-blå

Udførelser:

højre side: Til medial aflastning; eller til lateral aflastning på venstre ben

venstre side: Til medial aflastning; eller til lateral aflastning på højre ben

Ekstraudstyr:

Limiteringssæt i 3 størrelser se side 104 og prisliste


STØRRELSE

	1	2	3	4	5
Omkreds foroven (cm)	40–47	47–52	52–58	57–65	60–72
Omkreds forneden (cm)	28–34	34–39	39–43	43–46	46–50

+ = Udførelse (6) højre side medial / venstre side lateral, (7) venstre side medial / højre side lateral
° = Størrelse (1–5)

BESTILLINGS-NR.

121 4165 0070 +0°

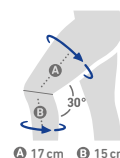

SofTec® OA

Aflastning ved medial slidgigt ved hjælp af justerbare luftkamre



Aflastning efter trepunktsprincippet Duocentrisk led

INDIKATION

- Medial slidgigt

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Aflastning af den mediale knæmuskelgruppe i henhold til trepunktsprincippet takket være funktionselement med trækbestandigt strikmateriale og remsystem
- Bandageeffekten fremskynder tilbagegangen af irritation af bløddede, ødematøse hævelser og ledhæmatomer
- Størst muligt bevægelighed for muskulaturen kombineret med høj trækstabilitet
- Valgiseringstrykket kan altid justeres individuelt via integrerede luftkamre
- Korrekt placering af ortosen sikres med to pelotter på patellas øverste og nederste kant

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: sort, titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele: se side 105 og prisliste

LEVERINGSOMFANG


Inkl. blæsebold (pumpe)

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **54 % færre smerter** efter seks ugers brug
- **øger mobiliteten** hos patienter fra et gennemsnit på 1 km til 3,5 km

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds foroven (cm)	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	57–63	60–66	
Omkreds midtfor (cm)	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	122 4680 00*0 +0°
Omkreds forneden (cm)	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	45–49	48–52	

* = Farve (7) sort, (8) titan
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1–7)

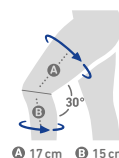

17 cm 15 cm

^A von Herrwaarden R., Eine neuartige valgiserende Orthese zur Behandlung der medialen Gonarthrose..., MOT, (3) 2005

SecuTec® OA


Aflastning og stabilisering ved slidgigt med fejlstilling af benets akse



En ortose til begge aflastningsretninger, ingen indsnævring af knæbredden



Justerbart spændebånd på læggen

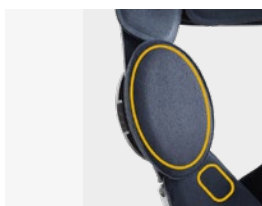

Gelpude med indsættelseskiller



Kombination af forskellige størrelser giver den ideelle pasform

INDIKATIONER

- Medial eller lateral slidgigt / arthritis (middelsvær til svær)
- Tilstand efter brusktransplantation
- Efter meniskrefiksation
- Ruptur forreste / bageste korsbånd (ACL / PCL) med benaksefejlstilling

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Korrektur og aflastning i henhold til trepunktsprincippet (varus og valgus).
- Stabilisering i henhold til firepunktsprincippet (skuffe, anterior / posterior)
- Ideel pasform og kraftoverførsel gennem justerbar lægrem og justerbar underbensramme
- Yderst behagelig at have på takket være let aluminiumsstativ
- Let at tage af og på med lynlukninger
- De anatomisk formede kondylære gelpuder med indsættelseskiller sikrer nøjagtig tilpasning

BRUGSANVISNING

- Individuel tilpasning til det distale stativ til varus- eller valgusindstillinger (hver 25°) med 3 mm unbrakonøgle
- Fleksion og ekstension er begrænset uafhængigt af hinanden (fleksion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) (ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)
- Bevægelsesbegrænsende til fikserende ved hjælp af ledbeholdning (kan bestilles separat)

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: blå

Udførelser: højre, venstre

Versjoner:

Tilbageførsortose, byggesæt

Kombination af over- og underbendel i to forskellige størrelser mulig (maksimal forskel: to størrelser) leveres som byggesæt

Tilbehør / reservedele:

se side 105 og prislister

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7
Omkreds foroven (cm)	38–42	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	60–72
Omkreds forneden (cm)	28–32	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	46–51

KOMBINATIONER


Proksimal stativstørrelse	1	2	3	4	5	6	7
Distal stativstørrelse	1–3	1–4	1–5	2–6	3–7	4–7	5–7

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1–7)

^ = proksimal stativstørrelse
> = distal stativstørrelse

BESTILLINGS-NR.


121 4691 0050 +0°	SecuTec OA
121 4692 0050 +^>	Konstruktionssæt

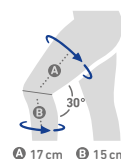

A 17 cm B 15 cm

MOS-Genu


Korrektion og stabilisering efter komplekse knæskader

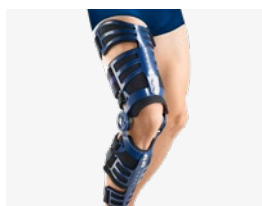



Lang model



Justering i varus- og valgusretning

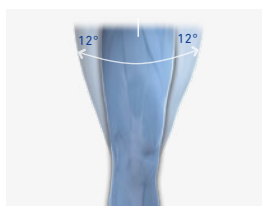

Varus- / valgusindstilling op til 12° mulig



INDIKATIONER

- Aflastning af den respektive muskelgruppe i forbindelse med varus- / valguslidigt
- Ruptur af forreste og / eller bageste korsbånd (ACL / PCL)
- Svær og / eller kompleks instabilitet (traumatisk, degenerativ; f.eks. »Unhappy Triad«)
- Sideledbåndsskader
- Til begrænsning af knæleddets bevægeområde (f.eks. efter meniskrefiksation eller meniskimplantering)
- Genu recurvatum (med korsrem)

MOS-Genu lang:

- Omstillingsosteotomier
- Komplekse ledbåndskonstruktioner
- Frakturer i nærheden af led, implantatkirurgi, beskyttelse
- Patellafraktur (konservativ og postoperativ)
- Tilstand efter brusktplantation

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Varus- / valgusindstillingen virker efter trepunktprincippet og aflaster den tilsvarende knæmuskelgruppe eller kollaterale ledbånd og korrigerer benaksens stilling
- Knæortosen er baseret på det kendte firepunktprincip og modvirker således en skuffe foran
- Stativets konstruktion stabiliserer knæleddet mod skiftende eller valgiserende kræfter, som en lang version med et længere greb
- Hyperekstension forhindres af poplitealrem (kan bestilles som reservedel)
- Meget god kraftoverførsel og sikker pasform takket være stroppernes store støtteoverflade
- Monocentrisk led med fysiologisk optimeret leddreakse nedsætter evt. tvangskræfter fra ortosen mod knæleddet til et minimum

BRUGSANVISNING

- Varus- / valgusindstilling op til 12°
- De monocentriske led kan låses i 10°-trin for fleksion og ekstension
- Bestemmelse af størrelsen af MOS-Genu-knæortosen: Patientens ben lægges i en 30°-vinkel og bøjningsvinklen kontrolleres med MOS-Genu-goniometeret. Opmålingen af M-L-knæbredden foretages på højde af femurkondylen med MOS-Genu-ortometeret (uden tryk). Ortosens størrelse aflæses i ortometerets vindue. Hvis størrelsesvisningen er delt, skal der tages hensyn til hævelsens tilstand eller en atrofi samt bredden af det andet knæled.

BAUERFEIND PLUS

- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: blå

Udførelser: short, long, højre, venstre

Tilbehør / reservedele: se side 105 og prisliste

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **30 % mindre belastning** på den mediale side

STØRRELSE	1	2	3	4	5	BESTILLINGS-NR.
Maks. Knæbredde (mm)	85 – 95	95 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 135	121 4660 405# +0°

= Udførelse (1) short, (2) long
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1 – 5)

^A Kutzner et al., The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee joint – in vivo load measurements in three subjects, Journal of Biomechanics 44, 1354–1360, 2011



GenuLoc®


Stabiliserende ortose til immobilisering af knæleddet





Knæhasepude



Formede aluminiumsskinner

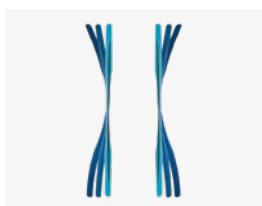

Plaststivere i siden



INDIKATIONER

- Præoperativ, postoperativ, posttraumatisk immobilisering
- Konservativ behandling af patellafrakturer

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Knævinkel kan tilpasses via dorsale aluminiumsskinner
- Mindre ødemdannelse grundet den aftagelige knæhasepude
- Stabiliserende plaststivere i siderne justeres automatisk til den indstillede knævinkel og sikrer en god pasform

BRUGSANVISNING

- Aluminiumsskinnerne er formet til en knævinkel på 20°
- Universalstørrelse, én model til højre og venstre knæ

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar

VALGMULIGHEDER

Farver: sort

Størrelse: universal

STØRRELSE

Fås i en universalstørrelse


BESTILLINGS-NR.

120 4320 0070 000

CoxaTrain®

Stabilisering og reduktion af smerter
i hofteledet



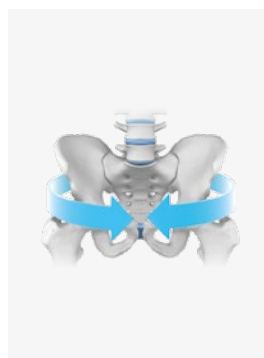

Stabilisering



Glutealpude - masserer triggerpunkter



Trochanterpude - masserer under bevægelse



Ledskinne monteres og tilpasses helt uden værktøj



Højdejusterbar ledskinne

INDIKATIONER

- Coxartrose (Kellgren-Lawrence-Score 2 – 4)
- Muskulær dysbalance lænd-bækken-hofte-regionen
- Muskulære problemer efter ledoperation hofte
- Impingement af hofteled
- Instabilitet af hofteledet (iht. T.E.P., efter revisionsindgreb)
- Instabilitetsfølelse i hoften
- Løsning af hofteprotese, hvis operation ikke er mulig

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Smertelindrende udligning af muskulær dysbalance i lænd-bækken-hofte-regionen ved bevægelse med positiv indflydelse på gangen:
 - ved stabilisering af bækkenet og aflastning af iliosacralleddene
 - ved masseffekt af den dorsale iliosacralled-friktionspelotte på de lokale ledbåndsstrukturer og den tilgrænsende muskulatur
 - ved hjælp af trochanterpudens friktionsmassage, som under gangen bevæger sig cyklisk op og ned
 - ved glutealpudens triggerpunkt-massage
- Stabiliserende føring ved hjælp af den laterale ledskinne
- Høj patientbevægelighed
- Enkel påtagning uden stor kraftanstrengelse ved hjælp af omdirigerede stropper og praktiske fingerlommer/-stropper

- højdejusterbar lårbandage via ledskinne
- bækkenbandagens individuelt indstillelige stropper til stabilisering
- begrænsning af hoftebevægelsen i fleksion og ekstension i tre trin med ekstra ledbegrænsningsstifter (60°, 75°, 90°)

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Tilpasning uden værktøj

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Ekstraudstyr:

Led short < 170 cm højde
Led long > 170 cm højde

Bemærk:

- I nogle tilfælde kan det ske, at en »short« ledskinne passer bedre end en »long« ledskinne eller omvendt.

Reserve dele:

se side 106 og prisliste

BRUGSANVISNING

Målrettet tilpasning gennem

- tilpasning af ledskinnen til den pågældende anatomi - helt uden værktøj

BÆKKENBANDAGE

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds bækken (cm)	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135	135–145	122 2581 1080 00°

° = Størrelse (1–6)



LÅRBANDAGE

STØRRELSE	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds lår midt på (cm)	43–53	53–63	63–73	122 2582 1080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre


° = Størrelse (1–3)



LED

STØRRELSE	SHORT	LONG	BESTILLINGS-NR.
Højde (cm)	<170 cm	>170 cm	122 2584 100# 000

= Udførelse (1) short, (2) long

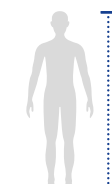

experts.bauerfeind.com/coxatrain

MyoTrain®

Justerbar kompressionsbandage til
behandling af muskelskader i låret



Ekstra pelletter: Funktionspelotte og
lille akutpelotte

INDIKATIONER

- Til kompression ved muskelskader (muskelfiltrationer, muskelforstrækninger, muskelfibersprængninger, muskelsprængninger, muskelblødninger)
- Tilbagefaldsprofylakse
- Forebyggende i forbindelse med gentagelsesskader
- Muskelkontusion i låret (trællår)
- Understøtning ved efterbehandling af muskelskader

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Den virker efter muskeltapningsprincippet med kompression på det skadede sted.
- Justering af kompressionen med velcrobåndsystem og to frit anvendelige pelletter
- Måltrettet effekt ved hjælp af en akut pelotte umiddelbart efter skaden er sket for at hæmme blødning og begrænse hæmatomer
- Kompression af et stort område takket være en stor funktionspelotte minimerer hævelse
- Maksimal brugskomfort og positionssikkerhed takket være anatomisk strikmateriale, silikoniseret hæftekant og trykreduceret kantområde
- Regulerer muskeltonus og forhindrer tilbagefaldsskader

BAUERFEIND PLUS

+ Nem håndtering

VALGMULIGHEDER


Farver: titan

Udførelser: Samme udførelse til højre og venstre side

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds foroven (cm)	44–48	48–52	52–56	56–60	60–64	64–68	68–72	110 3250 0080 00°
Omkreds forneden (cm)	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	


° = Størrelse (1–7)

experts.bauerfeind.com/myotrain

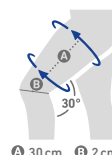

SofTec® Coxa

Multifunktionsortose til stabilisering af hofteledet

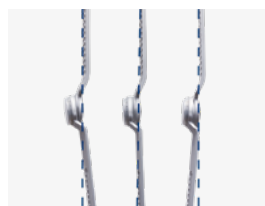


Monocentrisk led til abduktion / adduktion og fleksjon / ekstension




Tredelt bækkensælte i plastik



Højdejusterbart led

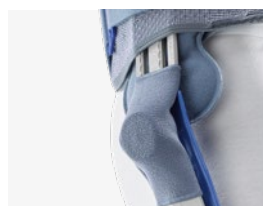

Ledbeskyttelse

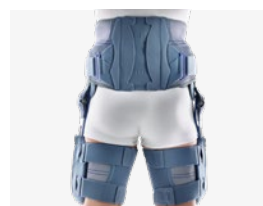

Til behandling af begge sider

INDIKATIONER

- Luksation
- Totalendoprotetisk indgreb
- Totalendoprotetisk revisionsindgreb
- Resektion af hoftehovedet (Girdlestone-situation)
- Hoftespacer ved operationer i forbindelse med udskiftning i begge sider
- Coxartrose (middelsvær til svær grad)
- Instabilitet

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Ortosen fikserer ledhovedet sikkert i skålen ved at kombinere den sikre placering af
 - Bækkenstøtten på bækkenkammene
 - Individuel tilpasning af lårstøtten i siden
 - Tilpasning af ortoseledet til indikationen
- Tillader forsyningen i den individuelt krævede adduktions- eller abduktionsposition og begrænser ekstension og fleksjon grundet det multidimensionale, monocentriske led
- Sikkert operationsresultat gennem begrænsning af givne bevægelser
- Let og korrekt placering af ortosen med anatomisk formet bækkenstøtte, integreret i strikmaterialet
- Dele i strikmateriale, som kan tilskæres individuelt og stropper på bækken- og benstøtten
- Optimal føring af hofteledet og anatomisk korrekt pasform takket være monocentrisk ortoseled

- Leddet fås ikke forkrøppet og kan bruges til behandling af både højre- og venstre hofteled
- Ortosen kan tilpasses direkte på sygesengen, selvom patienten ligger ned

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Ekstraudstyr:

Led, forkrøppet / led, ikke forkrøppet

Tilbehør / reservedele:

se side 106 og prislister

BRUGSANVISNING


- Kan indstilles individuelt og parallelt med hofterotationspunktet
- Leddet kan begrænses til ekstension og fleksjon i 10°-intervaller mellem -10° og +90°
- Adduktion og abduktion kan justeres trinløst mellem -6° og +6°

STØRRELSE	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	75–95	95–115	115–135	122 252# 0080 00°

= Udførelse (4) led, forkrøppet (til damer), (5) led, ikke forkrøppet (til herrer)

° = Størrelse (1–3)

experts.bauerfeind.com/softec-coxa

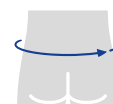



TIL MÅLRETTET RYGBEHANDLING

Model bærer rygbandagen LumboTrain® Lady.

FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSKILLET

LumboTrain® / Lady

Stabilisering og aflastning af lænderygsøjlen
med målrettet smertelindring

DEN NYE
GENERATION





Pelotte med friktionsnopper



Pelotte kan positioneres individuelt



Praktiske stropper for nemmere på- og aftagning



Perforeret lukning og store mellemrum i strikmaterialet for høj åndbarhed



LumboTrain Lady (taljeret snit)

INDIKATIONER

- Generelle smerter i regionen ved lænderygsøjlen (akut og kronisk)
- Degenerativ sygdom i lænderygsøjlen, f.eks. osteochondrose, spondylartrose, lumbale deformiteter, spondylolyse uden glidning mellem hvirvler
- Tilstand efter prolaps (konservativt, postoperativt)
- Tilstand efter diskektomi

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Måltrettet smertelindring under bevægelse muliggøres gennem massage med skiftende tryk fra strikmateriale og viskoelastisk pelotte
- Nemt, kraftbesparende påtagning ved hjælp af praktiske stropper
- Stabiliserer og aflaster lumbalt via den cirkulære kompressions oprejsende funktion
- LumboTrain Lady med taljeret form og høj benudskæring

BRUGSANVISNING

- Pelotten kan efter behov positioneres individuelt

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Komfortzone
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser:

Lige / taljeret snit

Tilbehør / reservedele:
se side 106 og prisliste

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ


- **21 % større aktivitet i rygmusklerne**
- **69 % færre smerter** i forhold til kontrolgruppen

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–145	110 841# 5080 00°

= Udførelse (0) lige snit, (1) taljeret snit
° = Størrelse (1–7)

^Δ Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211042>; 2019


experts.bauerfeind.com/lumbotrain | experts.bauerfeind.com/lumbotrain-lady

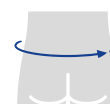


SacroLoc[®]

Til stabilisering af bækkenet og målrettet aflastning af iliosakralledene



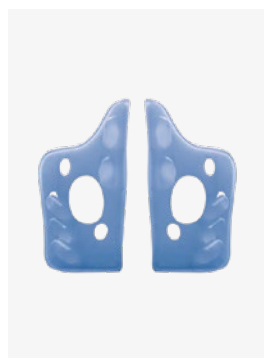

To massagepelletter

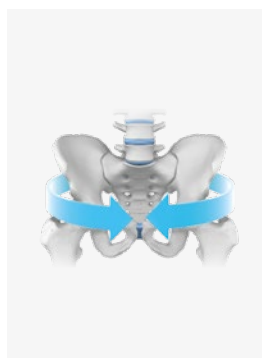

Stabilisering



Stropsystem

Elastisk netmateriale med
patenteret remsystemIndividuelt indstillelige
stropper

INDIKATIONER

- Sygdomme i iliosacralledene (iliosacralled-syndrom, iliosacralled-artrose, iliosacralled-ustabilitet)
- Bækkenringsustabilitet, f.eks. symfysesprængning og -løsning
- Sacroiliacledsblokering (akut og forebyggende)
- Strukturanomali efter spondylodese (i overgangen L5–S1)
- Myalgier og fibromyalgier i bækkenregionen
- Konservativ behandling efter bækkenfrakturer

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Aflaster øjeblikkeligt bækkenet og iliosacralledene ved cirkulær kompression gennem individuelt justerbare stropper
- Lindrer målrettet smerter med to friktionspuder på iliosacralledene, der kan placeres nøjagtigt
- Unik brugskomfort, selv når du sidder – gennem åndbart maskemateriale og en smal, flad lukning
- Omdirigeringsstropper i siderne for stor kraftpåvirkning ved lille kraftindsats
- Praktiske, brede sløjfer til komfortabel og nemmere påtagning
- Høj patient compliance, fordi ortosen er usynlig under tøjet
- Det stive stropsystem stabiliseres cirkulært, nutation af sacrum begrænses, ledbåndene aflastes, og smerter lindres

BRUGSANVISNING

- Ortosens egnethed og brug i løbet af en graviditet skal fra sag til sag aftales med en læge
- Pelletter kan placeres individuelt efter behov

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Tilbehør / reservedele:
se side 107 og prislister


DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **32 % smertereduktion**

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds bækken (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–140	120 8416 2080 00°


° = Størrelse (1–7)

^A Sichtung et al. Pelvic Belt Effects on Sacroiliac Joint Ligaments: A Computational Approach to Understand Therapeutic Effects of Pelvic Belts Pain Physician 2014; 17:43-51 · ISSN 1533-3159.
Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

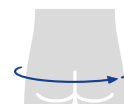

LordoLoc®

Stabilisering og aflastning af
lænderyggen

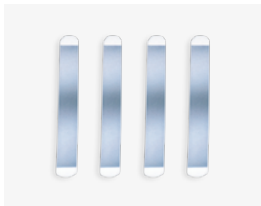



Dorsalt integrerede korsetstivere



Elastiske stropper til individuelt
justerbar kompression



Stabilisering og aflastning



INDIKATIONER

- Generelle smerter i regionen ved lænderygsøjlen (akut og kronisk)
- Middelsvær degeneration / muskulær insufficiens

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Retter lænderygsøjlen op med indbyggede korsetstivere
- Forstærket stabilisering med individuelt indstillelige stropper
- Fylder næsten ingenting takket være den lette og flade konstruktion
- Aflastning og aktivering af mave- og rygmusklerne ved hjælp af komprimerende, elastisk materiale

BAUERFEIND PLUS


- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan


STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	121 8500 0080 00°

° = Størrelse (1–6)

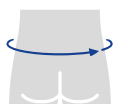

LumboLoc®




Stabiliserer og aflaster
lænderygsøjlen

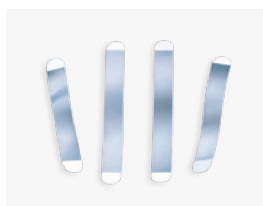

Retter lænderygsøjlen op med
dorsalt placerede korsetstivere



Stabilisering og aflastning



INDIKATIONER

- Generelle smerter i regionen ved lænderygsøjlen (akut og kronisk)
- Middelsvær degeneration / muskulær insufficiens
- Facetsyndrom

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Retter lænderygsøjlen op med indbyggede korsetstivere
- Stabiliserer og aflaster lumbalt takket være det komprimerende Train-strikmateriale
- Nem påtagning ved hjælp af praktiske stropper
- Sidder perfekt på grund af det elastiske materiale og de formbare korsetstivere

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan


DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **53 færre dage med smerter**
pr. år

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	121 8400 3080 00°

° = Størrelse (1 – 6)

^A Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers Annals of Internal Medicine 2007, 147, 685–692

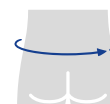

LumboLoc® Forte

Øget stabilisering og aflastning af lænderygsøjlen med variabelt remsystem



Korsbenspelotte



Lændepelotte



Korsetstivere



Funktionssele



Stabilisering og aflastning

INDIKATIONER

- Middelsvær lumbago-iskias med muskulære svigt ved båndskiveprotrusioner / prolaps
- Middelsvært (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Spondylolyse / spondylolistese grad 1
- Lumbal deformitet af middel grad
- Tilstand efter prolaps, f.eks. postoperativ
- Ligament-fibromyalgi
- Middelsvær degeneration / muskulær insufficiens

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Forstærket stabilisering med individuelt indstillelige stropper
- Retter lænderygsøjlen op med indbyggede korsetstivere
- Højdejusterbar funktionssele til kraftpåvirkning i henhold til indikationen
- Ekstra stabilisering ved hjælp af pelotter til lænden eller korsbenet*

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Ekstraudstyr: Oplyses også ved ordinerings af enten lænde- eller korsbenspelotte. Denne skal bestilles separat


Tilbehør / reservedele: se side 106 og prisliste

* Pelottetypen skal fremgå af en recept

LumboLoc Forte

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	121 8403 0080 00°

° = Størrelse (1–6)

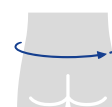

LumboLoc Forte pelotte

STØRRELSE	BESTILLINGS-NR.
Fås i en universalstørrelse	121 840# 0050 001

= Udførelse (4) korsbenspelotte, (5) lændepelotte

experts.bauerfeind.com/lumboloc-forte

Spinova®-System

Det modulære Spinova-system til målrettet behandling ved indikationer af lænderygsøjlen.

Spinova-systemet med seks forskellige rygortoser er et innovativt produktkoncept fra Bauerfeind til forbedring af behandlingsmulighederne for mange indikationer inden for lænderygsøjleområdet.

Spinova-rygortoserne følger samme koncept: Overgribende funktionselement er det behagelige Spinova-netmateriale. Cirkulært integrerede korsetstivere får det til at ligne et Lindemann-korset. Via det variable Spinova-stropsystem med rykkassetten tilføres den cirkulære kraft det behandlingsmæssigt relevante sted. Det klassiske stropsystem i

Classic-linjen tilfører en moderat kraft. Systemet suppleres med indikationsspecifikke Spinova-funktionselementer såsom ryg- og mavepelotte, støttestativ eller skål.

Spinova-lumbalortoser anvendes, hvis det er nødvendigt med en holdningskorrektur eller aflastning af lænderygsøjlen. De kan effektivt forebygge en ikke-fysiologisk belastning af rygsøjlen og dens båndskiver.

De kan tilpasses på mange måder og tilbyder patienten unik brugskomfort og nem håndtering.

KLASSISK STROPSYSTEM

Ved indikationer af lettere til middelsvær grad

- Moderat krafttilførsel
- Individuelt indstillelig kompression
- Komfortabel, nem påtagning

Produkttildeling:

- Spinova® Stabi Classic
- Spinova® Support Plus Classic
- Spinova® Unload Classic
- Spinova® Immo Plus Classic



VARIABELT STROPSYSTEM

Ved indikationer af middelsvær til svær grad

- Optimal stabilitet ved hjælp af målrettet kraftpåvirkning
- Kan tilpasses alt efter indikation
- Retning og styrke kan varieres
- Sikker reproducerbarhed for patienten

Produkttildeling:


- Spinova® Support Plus
- Spinova® Unload Plus
- Spinova® Immo Plus
- Spinova® Immo



Spinova®-System



Variabelt stropsystem,
set forfra

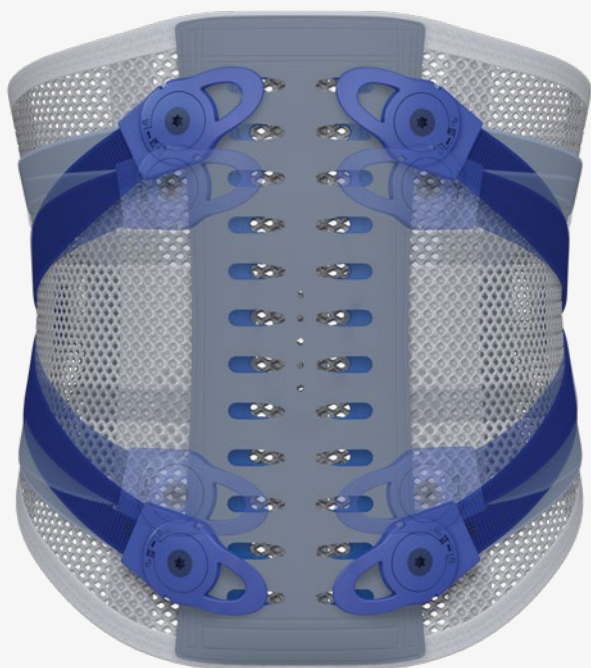

Variabelt stropsystem,
set bagfra



Aflordosering



Stabilisering



Lordosering

OVERGRIBENDE FUNKTIONSELEMENTER SPINOVA-SYSTEM



Cirkulært integrerede
korsetstivere svarer til
Lindemann- / gitter-korset



Elastisk Spinova-
netmateriale, anatomisk
formet, meget åndbart




Anatomisk formet
mavelukning med
mikrovelcro og
fingerlommer til let
af- / påtagning

FUNKTIONSELEMENT KLASSISK STROPSYSTEM



Individuelt justerbare
klassiske velcrobånd
tjener til moderat
stabilisering af
lænderygsøjlen


FUNKTIONSELEMENTER VARIABELT STROPSYSTEM

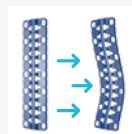

Formbar ryg-kassette
stabiliserer og
korrigerer fra sacrum
til de nedre thorakale
ryghvirvler



Parallelt med rygsøjlen
arrangeret rygkassette
dækker torntappene,
intet pres på sårområdet

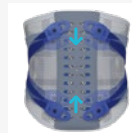

Stropper, der kan
højdejusteres individuelt,
sikrer, at krafttilførslen
svarer til indikationen



Gennem fast regulerbart
drejningsmoment i
båndlåsen, defineret
træk til stabilisering



Patenteret Spinova-
stropsystem til
tredobbelt trækraft



På grund af fast justerbar
remspænding og
spændelukning konstant
behandlingsrelevant
omkredstryk

INDIKATIONSSPECIFIKT BEHANDLINGSKONCEPT I FLERE TRIN

Den modulære struktur af Spinoval-lumbalortosen tillader ved fjernelse og tilføjelse af indikationsspecifikke funktionselementer en individuel behandling i henhold til en to-trins behandlingsplan.

FÅ MERE AT VIDE
UNDER
[https://player.vimeo.com/
video/158159586](https://player.vimeo.com/video/158159586)



INDIKATIONSSPECIFIKKE FUNKTIONSELEMENTER KAN NEDGRADERES OG OPGRADERES

Støttestativ



- Anatomisk selvjusterende, drejelige tværstivere
- Let formbare, højdejusterbare aluminiumsstivere

Pelotter



- Rygpelotte bruges til dækning af større områder og støtte af lændelordosen
- Mavepelotte anvendes til øget kompression i maveområdet

Skålsystem



- Individuelt justerbar ved hjælp af indbyrdes forskydelige skålhalvdele
- Skålen nedgraderes uden værktøj ved løsning af de elastiske stropper og den riflede skrue
- Kan bruges øjeblikkeligt på grund af forudindstillet skålomkreds
- Reduceret justeringsindsats på grund af to skålstørrelser (short 33 cm, standard 38 cm)

TO-TRINS BEHANDLINGSKONCEPT

1. Trin: Stabiliseringsfase

Til effektiv, postoperativ eller initialt konservativ korrektion af segmenterne anvendes ortosen sammen med de indikationsspecifikke funktionselementer (skål / støttestativ / pelotte).

2. Trin: Mobiliseringsfase

Med patientens tiltagende mobilisering fjernes de indikationsspecifikke funktionselementer. De resterende korsetstivere i ortosen giver en ekstern støttevirkning.

Efter behov kan ortosen til enhver tid og alt efter behovet for stabilitet opgraderes.



Spinova® Stabi Classic

Moderat stabilisering af lænderygsøjlen ved hjælp af korsetstivere



Cirkulært integrerede korsetstivere, Fingerlommer på mavelukningen
formbare

INDIKATIONER

- Middelsvært (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Middelsvær lumbago-iskias med lette svigt ved båndskiveprotrusioner / prolaps
- Tilstand efter prolaps (konservativt, postoperativt)
- Tilstand efter diskektomi
- Spondylolistese grad I

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabiliserer lænderygsøjlen moderat og retter den op ved hjælp af integrerede, cirkulært placerede korsetstivere
- Det giver en støttende effekt helt ind i den nederste brystrygsøjle
- Let påtagning ved hjælp af store fingerlommer på mavelukningen
- Perfekt pasform på grund af formbare aluminiumsstivere
- Stropperne længde kan indstilles individuelt

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling


VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Tilbehør / reservedele: se side 108 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 140	122 8561 0000 00°

° = Størrelse (1 – 6)

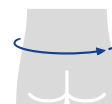

Spinova® Support Plus

Stabilisering af lænderygsøjlen med anatomisk formet rygpelotte



Cirkulært integrerede korsetstivere, formbare



Individuelt justerbart stropsystem til reguleret krafttilførsel



Aftagelig rygpelotte



Mavepelotte



Lordosering

INDIKATIONER

- Ryghvirvel frakturer (lumbalt) med skader på lænderygsøjlen – aflastning af forreste hvirvelkant
- Spondylolyse / spondylolistese grad II
- Middelsvær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Lumbal spinalstenose, også med pareser (konservativ, postoperativ)
- Middelsvært (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Svær degeneration / muskulær insufficiens
- Tilstand efter prolaps (postoperativ / konservativ)
- Tilstand efter diskektomi
- Tilstand efter spondylodese / kyphoplasti (en etage / flere etager)
- Osteoporose

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Cirkulært indbyggede korsetstivere virker stabiliserende og oprettende
- Individuelt justerbart stropsystem til reguleret krafttilførsel
- Forstærket opretning på grund af øget abdominaltryk ved hjælp af mavepelotte
- Understøtter den naturlige lændelordose ved storfladet, anatomisk formet rygpelotte

BAUERFEIND PLUS

- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: short, standard

- short <170 cm kropsstørrelse
- standard >170 cm kropsstørrelse

Tilbehør / reservedele: se side 108 og prisliste

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ


- **God patient-compliance og stærk følelse af stabilitet**

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–140	122 8542 100+ 00°

+ = Udførelse (0) standard, (1) short
° = Størrelse (1–7)

^Δ Rommelspacher, Y., Ziob, J., Wirksamkeit der Rückenorthese Spinova Support Plus bei der postoperativen Versorgung von segmentalen Spondylodese degenerativer LWS-Erkrankungen, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum Bonn, indleveret til offentliggørelse

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus

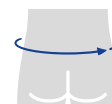

Spinova® Support Plus Classic

Understøtter moderat den naturlige lændelordose ved anatomisk formet rygpelotte



Aftagelig rygpelotte

INDIKATIONER

- Stabile ryghvirvel frakturer (lumbalt) med skader på lænderygsøjlen – aflastning af forreste hvirvelkant
- Middelsvær degeneration / muskulær insufficiens af rygsøjlen
- Middelsvær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Facetsyndrom
- Middelsvært (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Lumbale spinalstenoser (konservativ, postoperativ)
- Spondylolyse / spondylolistese grad II
- Tilstand efter prolaps (konservativ / postoperativ)
- Tilstand efter diskektomi
- Tilstand efter spondylodese / kyphoplasti (en etage / flere etager)
- Osteoporose

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Cirkulært indbyggede korsetstivere virker stabiliserende og oprettende
- Mavepelotte til øget kompression af maverummet til opretning af rygsøjlen
- Understøtter den naturlige lændelordose ved anatomisk formet rygpelotte

BAUERFEIND PLUS

- + Behandling i flere trin
- + Hudvenlig og åndbar

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Tilbehør / reservedele: se side 108 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 140	122 8563 1000 00°

° = Størrelse (1–6)



Spinova® Unload Classic

Moderat aflordosering og aflastning af lænderygsøjlen med et afmonterbart støttestativ





Cirkulært integrerede korsetstivere, formbare



Aftageligt støttestativ



Aflordosering



INDIKATIONER

- Ryghvirvel (lumbalt) med skader på lænderygsøjlen – aflastning af bagerste hvirvelkant
- Spondylolyse / spondylolistese grad I–II
- Middelsvær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Lumbal spinalstenose, også med pareser (konservativ, postoperativ)
- Middelsvært (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Facetsyndrom
- Tilstand efter diskektomi

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Cirkulært indbyggede korsetstivere virker stabiliserende og oprettende
- Korrigerer lændelordosen med selvjusterende støttestativer
- Aflastning af lænderygsøjlen hvirvelbagkant

BAUERFEIND PLUS

- + Hudvenlig og åndbar
- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: short, long

- short <170 cm kropsstørrelse
- long >170 cm kropsstørrelse


Tilbehør / reservedele:

se side 108 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70–80	80–90	90–105	105–115	115–125	125–140	122 8562 100+ 00°

+ = Udførelse (1) short, (2) long
° = Størrelse (1–6)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-classic

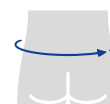

FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

Spinova® Unload Plus

Aflordisering og øget aflastning af lænderygsøjlen med afmonterbart støttestativ



Cirkulært integrerede korsetstivere, formbare



Aftageligt støttestativ



Mavepelotte



Aflordosering

INDIKATIONER

- Ryghvirvel frakturer (lumbalt) med skader på lænderygsøjlen – aflastning af bagerste hvirvelkant
- Spondylolyse / spondylolistese grad I–II
- Svær lumbal deformitet ved facetsyndrom / artrose
- Svær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Lumbal spinalstenose, også med pareser (konservativ, postoperativ)
- Alvorligt (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Foraminalstenose

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Cirkulært indbyggede korsetstivere virker stabiliserende og oprettende
- Korrigerer lændelordosen med selvjusterende støttestativer
- Aflastning af lænderygsøjlen hvirvelbagkant
- Forstærket opretning på grund af øget abdominaltryk ved hjælp af mavepelotte

BAUERFEIND PLUS

- + Hudvenlig og åndbar
- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: short, long

- short <170 cm kropsstørrelse
- long >170 cm kropsstørrelse

Tilbehør / reservedele:


se side 108 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–140	122 8543 100+ 00°

+ = Udførelse (1) short, (2) long

° = Størrelse (1–7)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-plus

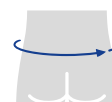

Spinova® Immo Plus

Immobilisering af lænderygsøjlen med mobiliseringsfunktion ved afmonterbar skal




Cirkulært integrerede korsetstivere, formbare



Individuelt justerbart skålsystem i to størrelser



Ekstra mavepelotte til forøget kompression af maverummet

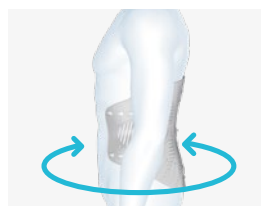

Immobilisering

INDIKATIONER

- Ryghvirvel frakturer (lumbalt) med betragtelige skader på lænderygsøjlen – aflastning af forreste og/eller bagerste hvirvelkant
- Tumorer (metastaser)
- Tilstand efter spondylodese (en etage / flere etager)
- Alvorligt (pseudo-) radikulært iskiassyndrom
- Svær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Lumbal spinalstenose med pareser (konservativt, postoperativt)
- Foraminalstenose
- Osteochondrose
- Svær degeneration / muskulær insufficiens
- Svær lumbal deformitet ved facetsyndrom / artrose
- Tilstand efter prolaps (konservativt, postoperativt)
- Tilstand efter diskektomi
- Spondylolyse / spondylolistese grad I–III

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabilisering af lænderygsøjlen, aflastning og bevægelsesbegrænsning foregår ved hjælp af en skål, der omgiver hele torsoen, med cirkulær bæckenstøtte
- Individuel justering og præcis pasform med todelt skålsystem
- Spinova-stropsystemet danner en funktionel enhed med skålen; kraftpåvirkningen omkring kroppen kan justeres individuelt og iht. indikationen
- Forstærket aflastning af rygsøjlen på grund af øget abdominaltryk ved hjælp af mavepelotte
- Indbyggede korsetstivere stabiliserer desuden og retter op

BAUERFEIND PLUS

- + Hudvenlig og åndbar
- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: short, standard

- short <170 cm kropsstørrelse
- standard >170 cm kropsstørrelse

Tilbehør / reservedele:

se side 108 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	130 – 140	122 8541 100+ 00°

+ = Udførelse (0) standard, (1) short

° = Størrelse (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus



Spinova® Immo Plus Classic




Immobilisering af lænderygsøjlen med mobiliseringsfunktion og afmonterbar skal



Individuelt justerbart skålsystem



Ekstra mavepelotte til forøget kompression af maverummet



INDIKATIONER

- Stabile ryghvirvel frakturer (lumbalt)
- Aflastning af forreste og / eller bagerste ryghvirvelkant
- Svær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Lumbal spinalstenose, også med pareser (konservativ, postoperativ)
- Tumorer (metastaser)
- Svær degeneration / muskulær insufficiens af rygsøjlen
- Spondylolyse / spondylolistese grad II – III
- Facetsyndrom / spondylitis
- Alvorligt (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Foraminalstenose
- Tilstand efter prolaps (konservativt / postoperativt)
- Tilstand efter diskektomi
- Tilstand efter spondylodese / kyphoplasti (en etage / flere etager)
- Osteochondrose

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabilisering af lænderygsøjlen, aflastning og bevægelsesbegrænsning foregår ved hjælp af en skål, i form af en kropsstøtte med cirkulær bækkenstøtte
- Individuel justering og præcis pasform med todelt skålsystem
- Forstærket aflastning af rygsøjlen på grund af øget abdominaltryk ved hjælp af mavepelotte
- Indbyggede stålstivere stabiliserer desuden og retter op

BAUERFEIND PLUS

- + Hudvenlig og åndbar
- + Behandling i flere trin

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: short, standard

- short <170 cm kropsstørrelse
- standard >170 cm kropsstørrelse

Tilbehør / reservedele:


se side 108 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 140	122 8564 100+ 00°

+ = Udførelse (0) standard, (1) short

° = Størrelse (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus-classic

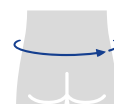

Spinova® Immo

Immobilisering af lænderygsøjlen



Individuelt justerbart skålsystem



Immobilisering

INDIKATIONER

- Immobilisering af lænderygsøjlen (præoperativt, postoperativt, posttraumatisk, betændelsessygdomme)
- Konservativ behandling af simple og stabile frakturer

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabilisering af lænderygsøjlen, aflastning og bevægelsesbegrænsning foregår ved hjælp af en skål, der omgiver hele torsoen, med cirkulær bækkenstøtte
- Individuel justering og præcis pasform med todelt skålsystem
- Spinova-stropsystemet danner en funktionel enhed med skålen; kraftpåvirkningen omkring kroppen kan justeres individuelt og iht. til indikationen

BAUERFEIND PLUS

+ Digital måling

VALGMULIGHEDER


Farver: titan

Tilbehør / reservedele: se side 108 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	7	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	130 – 140	122 8540 1000 00°

° = Størrelse (1–7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo

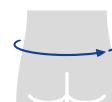

FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

SecuTec® Dorso

Aflordisering og aflastning
af lænderygsøjlen ved
støttestativ og korsetstivere





Aftageligt støttestativ



Anatomisk formede korsetstivere



Integrativt gittersystem



INDIKATIONER

- Spondylolistese (med recidiverende lumbago-iskias) grad I–III
- Tilstand efter prolaps (f.eks. postoperativ)
- Tilstand efter diskektomi
- Ryghvirvel frakturer (lumbalt)
- Osteoporose
- Middel til svær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Alvorligt (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Middel til svær lumbal deformitet ved facetsyndrom / artrose
- Lumbale spinalstenoser

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Aflaster og retter lænderygsøjlen gennem kombinationen af korsetstivere, anatomisk strikmateriale og stropper
- Fungerer aflordoserende gennem et støttestativ

BAUERFEIND PLUS

+ Nem håndtering

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	75–85	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135	121 8474 0080 00°

° = Størrelse (1–6)



SecuTec® Lumbo

Aflordosering og aflastning
af lænderygsøjlen ved
støttestativ



Aftageligt støttestativ



Mavepelotte

INDIKATIONER

- Svær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Alvorligt (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Spondylolyse / spondylolistese grad I–III
- Middel til svær lumbal deformitet ved facetsyndrom / artrose
- Lumbale spinalstenoser
- Moderat til svær degeneration / muskulær insufficiens
- Ryghvirvel frakturer (lumbalt)
- Tilstand efter prolaps, f.eks. postoperativ
- Tilstand efter diskektomi

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Virker aflordoserende gennem kombinationen af afmonterbart støttestativ, anatomisk strikmateriale og stropper
- Forstærket opretning på grund af øget abdominaltryk ved hjælp af mavepelotte

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: short, long

- short <170 cm kropsstørrelse
- long >170 cm kropsstørrelse

Tilbehør / reservedele:
se side 107 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds mave (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	121 8460 108+ 00°

+ = Udførelse (1) short, (2) long
° = Størrelse (1–6)

experts.bauerfeind.com/secutec-lumbo



FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

SofTec® Lumbo

Immobilisering af lænderygsøjlen med mobiliseringsfunktion ved afmonterbar skal



Kort version af halvskålen
(29 cm)



Lang version af halvskålen
(35 cm)



Nemmere påtagning med
LPT-remssystem



Mavepelotte

INDIKATIONER

- Spondylolyse / spondylolistese grad II – III
- Svær lumbago-iskias med muskulære svigt ved betydelige båndskiveprotrusioner / prolaps
- Alvorligt (pseudo-) radikulært iskias-syndrom
- Degenerativt facetsyndrom
- Tilstand efter prolaps, f.eks. postoperativ
- Tilstand efter diskektomi
- Tilstand efter spondylodese / kyphoplasti (en etage / flere etager)
- Lumbale spinalstenoser
- Ryghvirvel frakturer (lumbalt)
- Tumorer (metastaser)
- Svær degeneration / muskulær insufficiens

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabilisering af lænderygsøjlen: den målrettede kombination af de forskellige ortosemoduler (strikmateriale, CFK-stivere i to styrker, halvskål) gør det muligt at opnå forskellige niveauer af stabilisering
- Komfortabel og nem at tage på for patienten
- Behagelig at have på
- Forstærket aflastning af rygsøjlen på grund af øget abdominaltryk ved hjælp af mavepelotte

BAUERFEIND PLUS

- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: short, long, to højder


- Plasthalvskålens dorsale højde: short 29 cm, long 35 cm
- Stabilisering: short L5 – S1, long L3 – S1
- short <170 cm kropsstørrelse
- long >170 cm kropsstørrelse

Tilbehør / reservedele:
se side 107 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	HALVSKÅL	BESTILLINGS-NR.
Omkreds hofte (cm)	75 – 90	90 – 105	105 – 120		short	122 8480 0081 00°
	75 – 90	90 – 105	105 – 120	120 – 135	long	122 8480 0082 00°

° = Størrelse (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/softec-lumbo

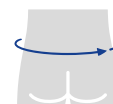


DorsoTrain®




Aktiv oprettelse og støtte af rygsøjlen



Reklinator i glasfiberforstærket plastik

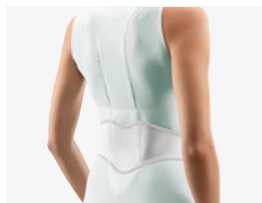

Uelastiske funktionszoner



INDIKATIONER

- Let degeneration / muskulær insufficiens
- Osteopeni, osteoporose
- Stabile, osteoporotiske frakturer på hvirvellegemer

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Opretning og støtte af rygsøjlen ved hjælp af en delvist fleksibel reklinator sammen med uelastiske funktionszoner i bodyen
- Anatomisk formet reklinator stabiliserer rygsøjlen og modvirker dannelsen af en afrundet ryg
- Individuel justering af stabiliseringsgraden via stropper
- Let og hurtigt påtagning med lynlås foran og praktisk, højt sluttende kilelukning

BAUERFEIND PLUS

+ Hudvenlig og åndbar

VALGMULIGHEDER

Farver: isblå

Udførelser: short, long

- short <170 cm kropsstørrelse
- long >170 cm kropsstørrelse

Tilbehør / reservedele:
se side 107 og prisliste

STØRRELSE	1	2	3	4	BESTILLINGS-NR.
Konfektion	S	M	L	XL	110 8455 008+ 00°

+ = Udførelse (1) short, (2) long
° = Størrelse (1-4)

experts.bauerfeind.com/dorsotrain

FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

Spinova® Osteo

Stabilisering og aktiv opretning af rygsøjlen med
frit bryst- og maveområde






Frit bryst- og maveområde




Bækkenbandage



Reklinator

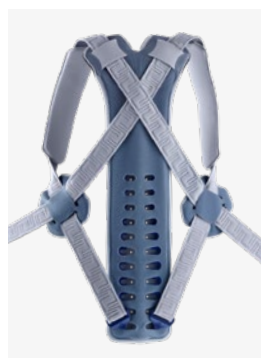

Remssystem

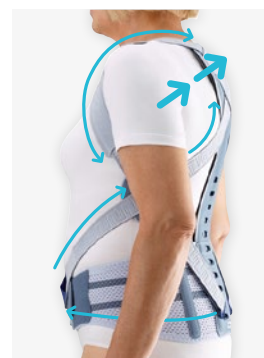

Funktionsprincip

INDIKATIONER

Aktiv opretning for at aflaste og korrigere lænderyg- og brystrygsøjlen samt begrænse overkroppens bevægelse på sagittalt plan, som f.eks. ved:

- Stabile, osteoporotiske frakturer på hvirvellegemer
- Osteopeni, osteoporose
- Smertende rundryggethed
- Muskulær insufficiens

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Øget følelse af stabilitet gennem polstret stropkryds i siden med korrigerende funktion
- Tilpasset holdningskorrektur med speciel remføring, der tillader individuel tilpasning
- Opretning sker ved hjælp af aluminiumsreklinator i forbindelse med strop og bækkenbandage
- Frit mave- og brystområde og stor positionstabilitet af ortosen takket være lavt siddende bækkenbandage
- Remføring, som kan tilpasses ved hjælp af højdejusterbar dorsal remfiksering
- Energibesparende påtagning ved hjælp af hånd- og fingerløkker

BAUERFEIND PLUS

- + Hudvenlig og åndbar
- + Tilpasning uden værktøj

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Ekstraudstyr:

Ved mellemstørrelser vælges mindre reklinator / større bandage

Fem standardstørrelser:
S2, S3, M3, M4, L4

18 Størrelseskombinationer af reklinator (S-L) og bandage (1-6)

Tilbehør / reservedele:
se side 108 og prislister

Spinoval Osteo

STØRRELSE	S2	S3	M3	M4	L4	BESTILLINGS-NR.
Omkreds ryg (cm)	50-58	50-58	59-67	59-67	68-76	
Omkreds bækken (cm)	80-90	90-100	90-100	100-110	100-110	122 8568 0000 0°°
°°-nummer	12	13	23	24	34	




Spinoval Osteo Reklinator, delvis samlet

STØRRELSE	S	M	L	BESTILLINGS-NR.
Længde ryg (cm)	50-58	59-67	68-76	122 8570 0000 00°

° = Størrelse (1) S, (2) M, (3) L

Bemærk: Vælg ved mellemstørrelse den mindre reklinator.

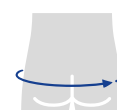

Spinoval Osteo Bækkenbandage, delvis monteret

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds bækken (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	122 8569 0000 00°

° = Størrelse (1-6)

Bemærk: Vælg ved mellemstørrelse den større bækkenbandage.

experts.bauerfeind.com/spinova-osteo

SofTec® Dorso

Øget stabilisering af bryst- og lænderygsøjlen





Skulderseler



Aluminiumsreklinator



Integreret kryds



INDIKATIONER

- Konservativ behandling af simple og stabile frakturer (op til TH8)
- Tilstand efter diskektomi
- Tilstand efter spondylodese
- Osteoporose
- Tumorer (metastaser) eller betændelsesprocesser (spondylitis)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Retter rygsøjlen og stabiliserer overkroppen med justerbar aluminiumsreklinator
- Beskytter mod skadelige, forkerte bevægelser
- Afmålt tilførsel af kræfter og opretning ved hjælp af stropper
- Stabiliseringskors i aluminium, som kan monteres på reklinatoren, forstærker ortosens oprettende virkning og begrænser desuden bevægelser på endeniveauet (ekstension / fleksion, hældning til siden)

BAUERFEIND PLUS

+ Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: short, long

- short <170 cm kropsstørrelse
- long >170 cm kropsstørrelse

Tilbehør / reservedele:
se side 107 og prisliste

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ

- **Aflaster, reducerer smerter og mobiliserer**


STØRRELSE	1	2	3	4	BESTILLINGS-NR.
Omkreds hofte (cm)	75–90	90–105	105–120	120–135	122 8490 008+ 00°

+ = Udførelse (1) short, (2) long

° = Størrelse (1–4)

^Δ Bauerfeind, ikke interventionel undersøgelse, ikke offentliggjorte data

experts.bauerfeind.com/softec-dorso

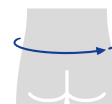

CerviLoc® | CerviLoc® S

Stabiliserer og aflaster halsrygsøjlen



Set fra siden

INDIKATIONER

- Smertetilstande i området ved halsrygsøjlen (cervikalsyndrom)
- Piskesmæld

CerviLoc S

- Alvorlige smertetilstande i området ved halsrygsøjlen (alvorligt cervikalsyndrom)
- Middelsvært tilfælde af piskesmæld
- Blokering

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Måltrettet aflastning af lindring af halsrygsøjlen
- Den integrerede fleksible plastforstærkning af CerviLoc S giver større støtte
- Behagelig at have på grund af blødt, anatomisk formet skumplast med en fordybning til hagen

BRUGSANVISNING

- Tre forskellige højder, hver med to omkredsstørrelser, tager højde for forskelligt udformede halsområder

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling


VALGMULIGHEDER

Farver: beige

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Højde (cm)	6,5	8,5	10	6,5	8,5	10	
Omkreds hals (cm)	32-38	34-40	34-40	36-44	36-44	38-48	
							120 959+ 0010 00°

+ = Udførelse (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S
° = Størrelse (1-6)

experts.bauerfeind.com/cerviloc | experts.bauerfeind.com/cerviloc-s

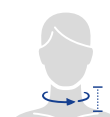

FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

TIL EN MÅLRETTET HÅND-, ALBUE- OG SKULDER- BEHANDLING



Model bærer håndortosen ManuLoc®.



FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

INDIKATIONSVEJLEDNING ARM- OG SKULDER-BEHANDLING

PRODUKT	MUSKELAKTIVERENDE				ManuLoc®	ManuLoc® long
	ManuTrain®	EpiTrain®	OmoTrain®	OmoTrain® S		
						
PRODUKTKENDETEGN	Aflastning og stabilisering af håndleddet	Aflastning og stabilisering af albueleddet	Aflastning og stabilisering af skulderleddet	Aflastning og stabilisering af skulderleddet	Immobilisering af håndleddet	Immobilisering af håndleddet og dele af underarmen
SIDE	86	94	96	97	87	88
INDIKATIONER						
Irritationstilstande (posttraumatisk / postoperativ)	●	●	●	●	●	●
Præoperativ					●	●
Forebyggelse / tilbagefaldsprofylakse	●	●	●	●		
Distorsion	●				●	●
Kontusion					●	●
Instabilitet, f.eks. ved fjedrende albueben	●					
Artrose / artrit	let	●	●	●		
	middel				●	●
	svær					
Sideledbåndsskade på tommelfingeren (f.eks. skitommel)						
Ledbåndsskader i finger- / håndområdet grundet traumer						
Lammelse						
Tendovaginitis (seneskedebetændelse)	let	●				
	middel				●	●
	svær					
Karpaltunnelsyndrom	let				●	
	middel					●
	svær					
Fibromyalgier		●				
Epicondylitis lateralis / medialis humeri		●				
Rotator-cuff ruptur (kompleks)						
Subkapital humerusfraktur						
SLAP-læsion						
Skulderproteseimplantation						
Skulderluxation						
Skade i akromioklavikulærleddet (AC-ruptur)						

ManuTrain®

Aflastning og stabilisering
af håndleddet



To anatomisk formede pelotter

INDIKATIONER

- Kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande
- Distorsioner (håndledsskader, f.eks. forstuvninger)
- Artrose (slidgigt)
- Instabilitet, f.eks. ved fjedrende albueben
- Tendovaginitis (seneskedebetændelse)
- Forebyggelse / tilbagefalds-profylakse

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabilisering og aktivering af håndleddet gennem jævn, cirkulær kompression
- Trykaflastning af nerver og blodårer med viskoelastiske, anatomisk formede pelotter
- Stabilisering af hånden iht. indikationen ved hjælp af formbar stiver i håndfladen
- Øget aflastning af håndleddet ved brug af stiver i håndfladen og velcrobånd
- Griben uden irritationer med en komfortzone mellem tommel- og pegefinger

BRUGSANVISNING

- Formen af stiveren i håndfladen kan formes, så hånden funktion kan justere iht. indikationen

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Komfortzone
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele:
se side 110 og prislister

LEVERINGSOMFANG

Inklusiv hjælp til påtagning

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ

- **klar lindring af smerter**
efter 2 uger

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds håndled (cm)	14 – 15	15 – 16	16 – 17	17 – 18	18 – 19	19 – 20	110 5150 30*0 +0°

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (1 – 6)

^Δ Spallek M., Akute Handgelenk- und Unterarmbeschwerden; Schnell wieder fit mit muskelaktivierender Bandage; Ärztliche Praxis, 44. Jahrgang, Nr. 20, S. 12 – 14. 1992

experts.bauerfeind.com/manutrain



ManuLoc®

Immobilisering af håndleddet





Stiver i mellemhånden og stivere i siden



Kanter med ultralydssvejseteknik



Velcrolukning med stropstop



INDIKATIONER

- Posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande
- Præoperativ
- Karpaltunnelsyndrom (let grad)
- Tendovaginitis (middel grad)
- Distorsioner / kontusioner
- Artrose (middel grad)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Sikring af håndleddet med aluminiumsstivere både i ekstension / fleksion samt radiale og ulnare
- Ortose forhindrer forkerte bevægelser af det distale og proximale håndled
- Anatomisk formet stiver i mellemhånden stabiliserer håndleddet i funktionsstilling og kan tilpasses individuelt.
- Ortosens konstruktion giver mulighed for funktionelle gribebevægelser og man bevarer således mobiliteten
- Nem påtagning af ortosen med kun en hånd mulig ved hjælp af praktiske velcrolukninger samt stropstop
- Stor bevægelighed af tommelfingeren ved hjælp af store tommelfingeråbninger på begge sider - kan således anvendes på højre og venstre side
- Kanter med ultralydssvejseteknik giver mere holdbarhed og bedre udseende

BRUGSANVISNING

- Stiver i mellemhånden med åbninger og stivere i siden i aluminium kan formes individuelt

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: universel (tommelfingeråbninger på begge sider)

STØRRELSE


	0	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds håndled (cm)	12-15	14-18	17-21	20-26	120 5340 2080 00°

° = Størrelse (0-3)



ManuLoc® long

Immobilisering af håndleddet og dele af underarmen

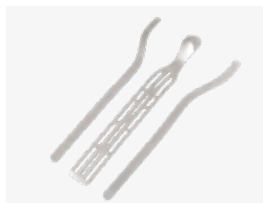


Stiver i mellemhånden og stivere i siden



Kanter med ultralydssvejseteknik



Velcrolukning med stropstop



INDIKATIONER

- Posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande, f.eks. efter anvendelse af gips ved radiusfrakturer
- Præoperativ
- Karpaltunnelsyndrom (middel grad)
- Tendovaginitis (middel grad med hvile- og nattesmerter)
- Distorsioner / kontusioner
- Artrose (middel grad)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Fastgørelse af håndleddet både i ekstension / fleksion og radiale og ulnare ved at forlængede aluminiumsstivere
- Begrænsning af rotationsbevægelserne i håndleddet ved ortosens længere greb
- Ortose forhindrer forkerte bevægelser af det distale og proximale håndled
- Stor bevægelighed af tommelfingeren ved hjælp af store tommelfingeråbninger på begge sider - kan således anvendes på højre og venstre side
- Immobilisering i en funktionel position med fungerende gribebevægelse ved hjælp af en stiver i mellemhånden, som kan tilpasses i formen
- Nem påtagning af ortosen med kun en hånd mulig ved hjælp af praktiske velcrolukninger samt stropstop
- Kanter med ultralydssvejseteknik giver mere holdbarhed og bedre udseende, i retning mod albuen polstres / indlejres den mere følsomme hud blødt

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: universel (tommelfingeråbninger på begge sider)

Tilbehør / reservedele: se side 110 og prislister

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A


- **22 % forbedret funktionalitet i hverdagen** seks uger efter operationen

BRUGSANVISNING

- Forlængede stivere i siden og mellemhånden med åbninger i aluminium kan formes individuelt

STØRRELSE	0	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds håndled (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5340 2082 00°

° = Størrelse (0–3)

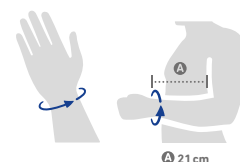


^A Dr. med. Peter Katzmaier, POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long Bauerfeind Life 3-2016.
Kan læses helt på bauerfeind-life.de

ManuLoc® long Plus

Immobilisering af håndleddet,
dele af underarmen og fingrene



Stiver i mellemhånden og
stivere i siden

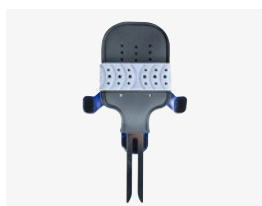

Formbar håndstøtte



Set fra siden med funktionsstilling



Kanter med ultralydssvejseteknik



Velcrolukning med stropstop

INDIKATIONER

- Posttraumatisk (multiple, komplekse skader i hånd- / fingerområdet)
- Præoperativ og postoperativ, f.eks. Morbus Dupuytren, mellemhåndsfrafrakturer
- Karpaltunnelsyndrom (alvorlig grad – støtte om natten)
- Tendovaginitis (alvorlig grad)
- Distorsioner / kontusioner
- Ledbåndsskader i finger- / håndområdet grundet traumer

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabiliserer håndled, underarm og fingre; tommelfingeren kan bevæges frit
- Justerbar lejeposition i Intrinsic-Plus-position eller normalposition til reducere af smerter og undgåelse af immobiliseringsskader
- Fastgørelse af håndleddet både i ekstension / fleksion og radiale og ulnare ved forlængede aluminiumsstivere
- Bred fingerstrop aflaster bånd og sener, mens fingrene holdes i positionen
- Stor bevægelighed af tommelfingeren ved hjælp af store tommelfingeråbninger på begge sider – kan således anvendes på højre og venstre side
- Nem påtagning af ortosen med kun en hånd mulig ved hjælp af praktiske velcrolukninger samt stropstop
- immobilisering i funktionsstilling af formbar stiver i mellemhånden
- Kanter med ultralydssvejseteknik giver mere holdbarhed og bedre udseende, i retning mod albuen polstret / indlejres den mere følsomme hud blødt

BRUGSANVISNING

- Forlængede stivere i siden og mellemhånden med åbninger i aluminium kan formes individuelt

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj
- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER


Farver: titan

Udførelser: universel (tommelfingeråbninger på begge sider)

Tilbehør / reservedele: se side 110 og prislister

STØRRELSE	0	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds håndled (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	128 5341 0080 00°

° = Størrelse (0–3)

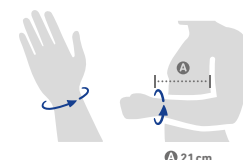

RhizoLoc®


Stabilisering af tommelfingerens grundled og tommelfingerens saddelled





Velcrolukning med stropstop



Velcrostykke til mobilisering

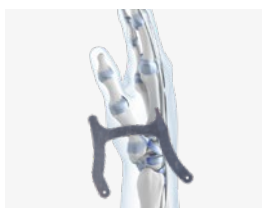

Aluminiumsbøjle



INDIKATIONER

- Postoperative og posttraumatiske irritationstilstande
- Sideledbåndsskader, f.eks. skitommel
- Rhizartrose (let grad)
- Distorsioner / kontusioner

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabilisering af tommelfingerens grundled og tommelfingerens saddelled
- Høj stabilisering af tommelfingerens grundled ved hjælp af aluminiumsbøjle
- Begrænset frigørelse af bevægelse i tommelfingerens grundled (dynamisering) med velcrostykke
- Nem påtagning af ortosen med kun en hånd. Mulig ved hjælp af praktiske velcrolukninger samt stropstop
- Behagelig at have på takket være åndbare materialer med luftporer
- Bibeholdelse af bevægeligheden i håndled med smal rem og lille ring

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

BRUGSANVISNING

- Individuel formbar aluminiumsbøjle

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^Δ

- **Smertelindring ved immobilisering af tommelfingerens saddelled** (op til MCP-I-leddet) i tilfælde af fingerpolyartroser

STØRRELSE

	1	2		BESTILLINGS-NR.
Omkreds håndled (cm)	12,5–16	16–20		
Omkreds tommelfinger (cm)	5–7	6,5–9		120 5330 1080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (1–2)

^Δ Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10–12, 2013

experts.bauerfeind.com/rhizoloc



ManuLoc® Rhizo

Immobilisering af håndleddet med tommelfingerholder



Stiver i mellemhånden og stivere i siden



Individuelt justerbar tommelfingerfiksering



Kanter med ultralydssvejseteknik



Velcrolukning med stropstop

INDIKATIONER

- Akutte, posttraumatiske og postoperative irritationstilstande i håndleddet og tommelfingeren
- Præoperativ
- Tendovaginitis på radialsiden (middel grad)
- Rhizartrose (alvorlig grad)
- Karpaltunnelsyndrom (let grad)
- Distorsioner / kontusioner
- Ledbåndsskader i finger- / håndområdet grundet traumer

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Ortose forhindrer forkerte bevægelser af det proximale og distale håndled samt tommelfingerens grund- og saddelled
- Immobilisering af håndleddet ved hjælp af formbare aluminiumsstivere
- Stabilisering af håndleddet i funktionsstilling takket være en anatomisk formet stiver
- Nem påtagning af ortosen med kun en hånd. Mulig ved hjælp af praktiske velcrolukninger samt stropstop
- Kanter med ultralydssvejseteknik giver mere holdbarhed og bedre udseende

BRUGSANVISNING

- Stiver i mellemhånden med åbninger, stivere i siden og bøjler i aluminium kan formes individuelt
- I løbet af behandlingen kan tommelfingeren gøres stadig mere dynamisk, og tommelfingerholderen kan fjernes helt

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj
- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele: se side 110 og prislister

STØRRELSE


	0	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds håndled (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5345 0080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (0–3)



ManuLoc® Rhizo long

Immobilisering af håndleddet og dele af underarmen med tommelfingerholder

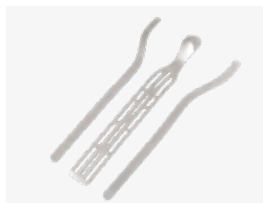

Stiver i mellemhånden og stivere i siden



Individuelt justerbar tommelfingerfiksering



Aluminiumsbøjle



Kanter med ultralydssvejseteknik



Velcrolukning med stropstop

INDIKATIONER

- Posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande, f. eks. efter anvendelse af gips ved scaphoideumfrakturer
- Præoperativ
- Tendovaginitis på radialsiden (middel grad)
- Rhizartrose (alvorlig grad)
- Distorsioner / kontusioner
- Karpaltunnelsyndrom (middel grad)
- Sideledbåndsskader, f. eks. skitommel

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Ortose forhindrer forkerte bevægelser af det proximale og distale håndled samt tommelfingerens grund- og saddelled
- Begrænsning af rotationsbevægelserne i håndleddet ved ortosens længere greb
- Immobilisering af håndleddet ved hjælp af formbare aluminiumsstivere
- Stabilisering af håndleddet i funktionsstilling takket være en anatomisk formet stiver
- Nem påtagning af ortosen med kun en hånd. Mulig ved hjælp af praktiske velcrolukninger samt stropstop
- Kanter med ultralydssvejseteknik giver mere holdbarhed og bedre udseende, i retning mod albuen polstres / indlejres den mere følsomme hud blødt

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj
- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Tilbehør / reservedele: se side 110 og prislister

BRUGSANVISNING

- Stiver i mellemhånden med åbninger, stivere i siden og bøjler i aluminium kan formes individuelt
- I løbet af behandlingen kan tommelfingeren gøres stadig mere dynamisk, og tommelfingerholderen kan fjernes helt


STØRRELSE

	0	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds håndled (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5345 0082 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (0–3)


experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long

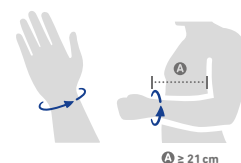


A ≥ 21 cm

ManuLoc® Rhizo long Plus

Immobilisering af hele hånden og dele af underarmen

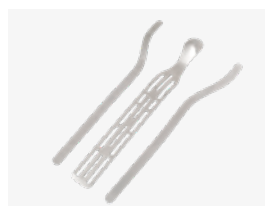

Stiver i mellemhånden og stivere i siden

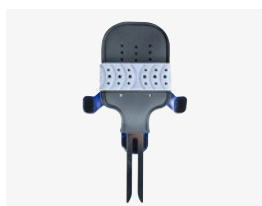

Formbar fingerstøtte



Individuelt justerbar tommelfingerfiksering



Kanter med ultralydssvejseteknik



Velcrolukning med stropstop

INDIKATIONER

- Posttraumatisk (multiple, komplekse skader i hånd- / fingerområdet)
- Præoperativ og postoperativ, f. eks. Morbus Dupuytren, mellemhåndsfrakturer
- Komplekse ledbåndsskader i finger- / håndområdet grundet traumer
- Lammelser
- Tendovaginitis (alvorlig grad)
- Distorsioner / kontusioner

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Stabiliserer håndled, underarm, fingre inkl. tommelfinger
- Justerbar leje-position til reducere af smerter og undgåelse af immobiliseringsskader
- Immobilisering af håndleddet ved hjælp af formbare aluminiumsstivere
- Nem påtagning af ortosen med kun en hånd. Mulig ved hjælp af praktiske velcrolukninger samt stropstop
- Kanter med ultralydssvejseteknik giver mere holdbarhed og bedre udseende, i retning mod albuen polstres / indlejres den mere følsomme hud blødt

BRUGSANVISNING

- Fingerstøtten leveres i neutral stilling og kan formes hurtigt og uden værktøj i Intrinsic-Plus-stilling
- Stiver i mellemhånden med åbninger, stivere i siden og bøjler i aluminium kan formes individuelt
- Hjælp ved fysioterapi og mobilisering i helingsprocessen takket være aftagelig fingerstøtte og tommelfingerholder

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Komfortzone
- + Tilpasning uden værktøj
- + Behandling i flere trin
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre


Tilbehør / reservedele: se side 110 og prislister

STØRRELSE	0	1	2	3	BESTILLINGS-NR.
Omkreds håndled (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	128 5347 0080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (0–3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long-plus

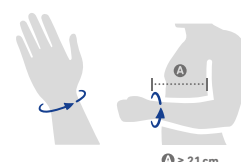

FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER


TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

EpiTrain®

Aflastning og stabilisering
af albueleddet


NYHED

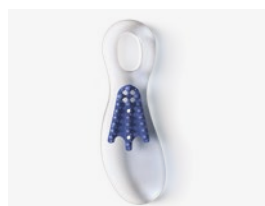


Epicon+ Pads




Epicon+ Pads på produktet

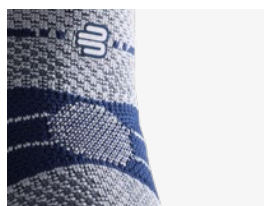

Komfortabel albuebøjningszone

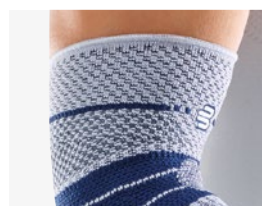

Langt strikmateriale til overarm

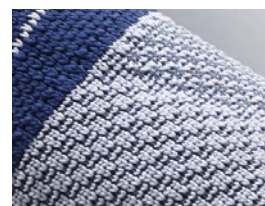

Train-strikmateriale

INDIKATIONER

- Posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande, f.eks. epicondylitis
- Artrose / artrit (slidgigt / ledbetændelse)
- Fibromyalgier (degenerativ sygdom i senen)
- Fibromyalgier (sygdom i muskelsenen)
- Forebyggelse / tilbagefaldsprofilakse

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Den terapeutiske kompression af den særligt strukturerede overflade af strikmaterialet med højder og dybder bevirker sammen med Epicon+ Pads en klar aflastning og målrettet smertelindring
- De viskoelastiske Epicon+ Pads med epikondyleudsparinger fordeler bandagekompression fra epikondylerne på det omgivende bløddelsvæv og giver mulighed for sikker placering af bandagen
- Den bløde og særligt åndbare komfortzone i albuebøjningen af det anatomisk formede train-strikmateriale giver en høj brugskomfort
- Epicon+ Pads aflaster epikondylen, og massagenopperne i en fastere materialekomponent udøver under bevægelser en velgørende massage med skiftende tryk på muskel- og senevedhæftninger

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Komfortzone
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: beige, sort, titan

Udførelser: samme udførelse til højre og venstre side

Ekstraudstyr: kan fremstilles efter mål i beige og titan, silikonebånd, velcrolukning

Tilbehør / reservedele: se side 111 og prislister

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **Efter 14 dage 50 % færre smerter** sammenlignet med starten af behandlingen med EpiTrain (kontrolgruppe: -19 %)


STØRRELSE	0	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds underarm i cm	21–23	23–25	25–27	27–29	29–31	31–33	33–35	110 6160 40*0 00°

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan
° = Størrelse (0–6)

Efter mål: De nøjagtige målepunkter finder du på måleblokken eller i måleskemaet på side 120.

^A Valle-Jones et al., Controlled trial of an elbow support (EpiTrain) in patients with acute painful conditions of the elbow: a pilot study, Curr. Med. Res. Opin., 12, S. 224–233, 1990

experts.bauerfeind.com/epitrain

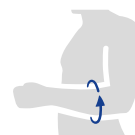

EpiPoint®

Målrettet aflastning af senevedhæftningerne på albuen



Det røde signalområde indikerer et for stærkt tryk



Fempunktspelotte

INDIKATIONER

- Epicondylitis lateralis humeri (betændelse i muskeludspringet, tennisalbue)
- Epicondylitis medialis humeri (betændelse i muskeludspringet, golfalbue og kastealbue)
- Forebyggelse / tilbagefaldsprofylakse

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Målrettet aflastning af overbelastede strukturer ved afmålt kompression på underarmen
- Viskoelastisk fempunktspelotte stimulerer triggerpunkterne og muliggør præcis kompression
- Individuel, trинløs trykjustering med elastisk reguleringsbånd
- Rødt signalområde på reguleringsbåndet som en indikator på for stort tryk

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: sort, titan

Udførelser: universal

LEVERINGSOMFANG

Også på displayet (12 stk.)

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **23 % færre smerter** (hos patienter med positiv extensor grip test)

STØRRELSE

Omkreds underarm (cm)

UNIVERSAL


22,5–33

BESTILLINGS-NR.

120 6350 10*0 000


* = Farve (7) sort, (8) titan

^A Ph.d.-afhandling: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

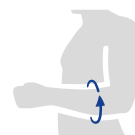

OmoTrain®

Aflastning og stabilisering af skulderleddet

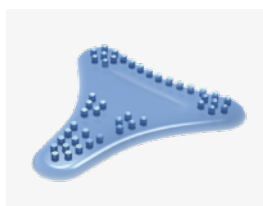

Udtagelig delta-pelotte

INDIKATIONER

- Glenohumeral instabilitet
- Acromioclaviculær (AC) instabilitet
- Tendinopatier på rotator cuff muskulatur
- Forebyggelse / tilbagefalds-profylakse
- Subacromiel impingement og bursitis

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Komprimerende strikmateriale og træk fra remsystemet centrerer glenohumeralleddet.
- Viskoelastisk delta-pelotte med friktionsnopper, der masserer skulderens bløde væv under bevægelse. Muskelledsansen forbedres, resorptionen af ødemer og hæmatomer accelereres, smerter lindres
- Remsystemet føres uden om brystet, så brystet er frit.
- Delta-pelotte kan eventuelt sættes i med velcro og placeres efter behov

BAUERFEIND PLUS

- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: Samme udførelse til højre og venstre side

Tilbehør / reservedele: se side 111 og prislister

DOKUMENTERET I UNDERSØGELSE^A

- **Understøtter den funktionelle behandling** af rotatormanchettlæsioner eller tendinose

STØRRELSE	0	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds (cm)	20–22	22–24	24–26	26–29	29–32	32–36	36–40	110 7170 2080 00°


° = Størrelse (0–6)

^A Scheuermann et al., Die frühfunktionelle Behandlung der verletzten Schulter unterstützt durch eine aktive Schulterbandage, Aktuelle Traumatologie, S. 35–78, April '91.



OmoTrain® S

Aflastning og stabilisering af skulderleddet

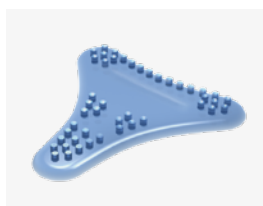

Udtagelig delta-pelotte

INDIKATIONER

- Kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritationstilstande
- Forebyggelse / tilbagefaldsprofilakse
- Artrose

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Komprimerende strikmateriale og træk fra remsystemet forbedrer placeringen og centrerings af skulderleddet
- Viskoelastisk delta-pelotte med friktionsnopper, der masserer skulderens bløde væv under bevægelse. Derved lindres smerterne, muskel-ledsansen forbedres og de ledstabiliserende muskler aktiveres
- Delta-pelotten kan eventuelt sættes i med velcro og placeres individuelt
- Hurtig og nem påtagning af bandagen ved hjælp af direkte remføring

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Train-strikmateriale
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

STØRRELSE	0	1	2	3	4	5	6	BESTILLINGS-NR.
Omkreds (cm)	20–22	22–24	24–26	26–29	29–32	32–36	36–40	110 7171 0080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

° = Størrelse (0–6)



OmoLoc®

Immobilisering af skulderen



Bløde underlagssamlinger



Lukning med fingerlomme



Med skuldersele



Brede hånd-/ armløkker giver god støtte til armen

INDIKATIONER

- Immobilisering, f. eks. efter en skulderoperation
- Posttraumatisk, præoperativ
- Skulderluxation

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Immobilisering af skulderleddet i 0°-abduktionsstilling (roteret indad), f. eks. til at sikre operationsresultatet
- Underarmen fastgøres i den krævede bøjning på 90–100° og kan derved lindre smerter
- Sikker fastgørelse og perfekt pasform takket være tre individuelt placerbare armløkker
- Sikker afstemt tilpasning gennem mavelukning med stropsystem
- Hygiejnisk fordel på grund af ortosens konstruktion
- Ingen behov for skuldersele, forkert kropsholdning og dermed forbundne muskelspændinger undgås således, imidlertid fås skulderselen som reservedel

BRUGSANVISNING

- Fiksering af underarmen i den medicinske korrekte behandlingsposition, 90-100°

BAUERFEIND PLUS

- + Nem håndtering
- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Ekstraudstyr: Skuldersele fås som reservedel

Tilbehør / reservedele: se side 111 og prisliste

STØRRELSE

Omkreds mave (cm)

1

op til 100

2


100–130

BESTILLINGS-NR.

120 7360 1120 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
° = Størrelse (1–2)

experts.bauerfeind.com/omoloc

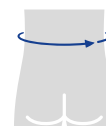

SecuTec® Omo

Immobilisering af skulderen med individuelle armpositioner og mobiliseringsfunktion



Abduktion / adduktion



Rotation

INDIKATIONER

- Rotator-cuff ruptur (kompleks)
- Subkapital humerusfraktur
- SLAP-læsion
- Skulderproteseimplantation
- Skulderluksation
- Posttraumatiske, postoperative irritationstilstande
- Præoperativ
- Skade i akromioklavikulærledet (AC-ruptur)

FORDELE OG VIRKEMÅDER

- Immobilisering af skulderledet i frit valgbar abduktion til aflastning af seneapparatet
- Smertereduktion gennem begrænsning
- Mobilisering mulig via frigivelse af rotationen indad- eller udadtil ved et tryk på en knap
- Højdejustering af armstøtten til den individuelle armlængde. Hældningsvinklen justeres automatisk
- Aflastning af hånden ved hjælp af en udtrækkelig håndstøtte
- Sikker og individuel tilpasning gennem mavelukning med stropsystem
- Frigørelse af rotationen giver mulighed for at aflaste og øge brugskomforten om natten og skal kun bruges efter samråd med lægen
- Ingen behov for skuldersele, forkert kropsholdning og dermed forbundne muskelspændinger undgås således, imidlertid fås skulderselen som reservedel

BRUGSANVISNING

- Kan justeres på to niveauer
- Abduktionsvinkel op til 60°, individuelt justerbar
- Ind- og udad rotation kan reguleres via knaptryk
- For tilpasning til kropsformen kan bæckenstøtten vippes
- Ingen skuldersele nødvendig, da armstøtten hviler på bæckenstøtten

BAUERFEIND PLUS

- + Hudvenlig og åndbar
- + Digital måling

VALGMULIGHEDER

Farver: titan

Udførelser: højre, venstre

Ekstraudstyr: Skuldersele fås som reservedel

Tilbehør / reservedele: se side 111 og prislister

STØRRELSE

Omkreds mave (cm)


+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

UNIVERSAL

70 – 140

BESTILLINGS-NR.

121 7505 0120 +01

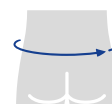



TILBEHØR OG RESERVEDELE

FOD OG
ANKELKNÆ, LÅR OG
HOFTRYGSØJLE OG
HALSHÅND, ALBUE OG
SKULDERTILBEHØR OG
RESERVEDELEEFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

Reserve dele leveres inden for 3 til 4 arbejdsdage.


TIL BEHANDLING AF FOD

AchilloTrain®

BETEGNELSER

		ARTIKEL-NR.
01	Udligningspude (til bandagestørrelse 1–2)	129 1102 1000 001
02	Udligningspude (til bandagestørrelse 3–6)	129 1102 1000 003
03	Hælpuder (til bandagestørrelse 1–2)	119 1103 0000 +01
04	Hælpuder (til bandagestørrelse 3–6)	119 1103 0000 +02

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

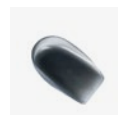

01|02




03|04

AirLoc®

BETEGNELSER

		ARTIKEL-NR.
01	Blæsebold SofTec OA / AirLoc	129 4684 0070 000

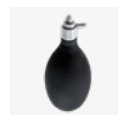

01

MalleoLoc® L

BETEGNELSER

		STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01	Remsæt	universal	129 1328 1000 +00
02	Puder	universal	129 1329 1000 +00
03	Pelotte		129 1332 1000 000

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre



01



02



03

MalleoLoc® L3

BETEGNELSER

		STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01	Remsæt	universal	129 1328 1000 +00

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre




01

MalleoLoc®

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Rem, proksimal	universal	129 1318 3123 +00
02 Rem, distal	universal	129 1318 3124 000
03 Spænde		129 1309 3120 000
04 Remsæt uden spændepolstring	universal	129 1302 3080 +00
05 Remsæt med spændepolstring	1-2	129 1302 3080 +0°
06 Ortometer / goniometer		121 4674 0030 000

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

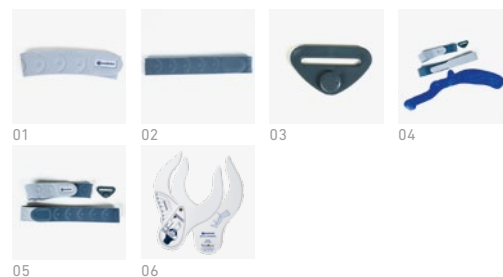

ValguLoc®

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Remsæt	1-3	129 1322 0000 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre



ValguLoc® II

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Remsæt	universal	129 1322 0000 000



Hjælp til påtagning

BETEGNELSER	ARTIKEL-NR.
01 Hjælp til påtagning bandager	140 0222 0050 000



TIL BEHANDLING AF KNÆ, LÅR OG HOFTE

GenuTrain®

BETEGNELSER	FARVE	ARTIKEL-NR.
01 Nopret hæftebånd (5 cm bredt, 1 m langt)	titan	119 4123 0000 000



01

GenuTrain® S

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Remsæt (til bandagestørrelse 1–2)	1	129 4132 30*0 001
02 Remsæt (til bandagestørrelse 3–4)	2	129 4132 30*0 002
03 Remsæt (til bandagestørrelse 5–7)	3	129 4132 30*0 003
04 Ledstivere	universal	129 4131 30*0 +00

* = Farve (1) beige, (7) sort, (8) titan
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre



01|02|03



04

SofTec® Genu

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Ledskinner, lateral	universal	129 4602 1060 +00
02 Ledskinner, medial	universal	129 4603 1060 +00
03 Ledbeskyttelse (sportsbeskyttelse)		129 4601 1070 000
04 Begrænsningssæt (5 dækstykker, 10 låsestifter)		129 4607 0000 000

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre



01|02



03



04

SecuTec® Genu

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Remsæt	1–7	129 4611 2070 00°
02 Stativpolstringssæt	1–7	129 4613 1070 +0°
03 Rempolstring		129 4617 1070 00°
04 Rempolstring, silikoniseret (2 stk.)		129 4698 0000 00^
05 Begrænsningskiler (2 x rammer + 2 x E0)		129 4616 1060 000
06 Ramme	1–7	129 4650 1**# +0°
07 Slimpose		129 4651 1070 000
08 Tibiakantpude		129 4652 0070 000
09 Ledkappe med kvartdrejelukning (1 stk)		129 4645 1000 000
10 Hurtiglukningssæt (4 stk)		129 4654 1000 000

** = Farve (05) blå, (23) grøn
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre
= Udførelse (3) proximal (4) distal
° = (1) til str. 1–2, (2) til str. 3–4, (3) til str. 5–6, (4) til str. 7
^ = (1) til str. 1–2, (3) til str. 3–4, (5) til str. 5–6, (7) til str. 7



01



02



03



04



05



06 proximal



06 distal



07



08



09



10

GenuTrain® OA

BETEGNELSER	ARTIKEL-NR.
01 Limiteringssæt til størrelse 1 og 2	129 4166 0070 001
02 Limiteringssæt til størrelse 3 og 4	129 4166 0070 003
03 Limiteringssæt til størrelse 5	129 4166 0070 005



01|02|03

SofTec® OA

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Led – komplet (med luftpolstring, pelotte)	universal	129 4682 0070 +00
02 Luftpolstring	universal	129 4683 0000 +00
03 Blæsebold SofTec OA / AirLoc		129 4684 0070 000
04 Låsesæt (4 fleksionsstop, 3 ekstensionsstop)		129 8681 0060 000

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre



01

02

03

04

SecuTec® OA

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Remsæt	1–7	129 4693 0000 00°
02 Stativpolstringssæt (inkl. gelpude)	1–7	129 4694 0000 +0°
03 Rempolstring	1–7	129 4695 0000 00°
04 Rempolstring, silikoniseret (2 stk.)		129 4698 0000 00^
05 Ramme (blå)	1–7	129 4696 005# +0°
06 OA-slimpose		129 4697 0000 000
07 Hurtiglukkingsæt (4 stk)		129 4654 1000 000
08 Begrænsningskiler (2x rammer + 2x E0)		129 4616 1060 000
09 Unbrakonøgle 3 mm		190 0007 0010 102

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

= Udførelse (0) distal, (3) proximal

^ = (1) til str. 1–2, (3) til str. 3–4, (5) til str. 5–6, (7) til str. 7



01

02

03

04

05

06

07

08

09

MOS-Genu

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
EKSTRAUDSTYR		
01 Popliteal-korsrem (til størrelse 1–2)		121 4662 4050 001
02 Popliteal-korsrem (til størrelse 3)		121 4662 4050 003
03 Popliteal-korsrem (til størrelse 4–5)		121 4662 4050 004
04 Popliteal-pelotter	1–5	121 4661 4090 00°
05 Ledring	1–5	121 4664 4050 +0°
06 Reservedelssæt (skruer)		121 4671 3000 000
07 Dækplader (10 stk.)		121 4673 0000 000
08 Ortometer / goniometer		121 4674 0030 000

KORT VERSION


09 Ramme	1–5	121 4664 405# +0°
10 Pudesæt	1–5	121 4665 4090 +0°
11 Remsæt	1–5	121 4667 4050 00°

LANG VERSION

12 Forlængelsesramme	universal	121 4669 405# +00
13 Rem til forlængelsesramme proximal, til str. 1–3	1–3	121 4668 4053 00°
14 Rem til forlængelsesramme proximal, til str. 4–5		121 4668 4053 004
15 Rem til forlængelsesramme distal, til str. 1–3		121 4668 4054 001
16 Rem til forlængelsesramme distal, til str. 4–5		121 4668 4054 004
17 Polstring til forlængelsesramme	universal	121 4666 409# +00

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

= Udførelse (3) proximal (4) distal

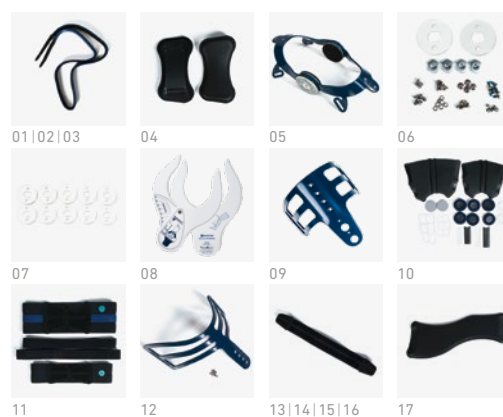

01|02|03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13|14|15|16

17

CoxaTrain®

BETEGNELSER	ARTIKEL-NR.
01 Dækstykker	129 2583 1000 000
02 Glutealpude	129 2585 1000 000
03 Trochanterpude / Puder	129 2586 1000 000
04 Ledbegrænsningsstifter (2x)	129 2587 1000 000
05 Gelenk mit Kappe, short	129 2588 1001 000
06 Gelenk mit Kappe, long	129 2588 1002 000
07 Pelotter (2-delte)	119 8416 0000 000



SofTec® Coxa

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Pose til smådele		129 2521 0000 000
02 Lårbandage, reservedel	universal	129 2521 0080 000
03 Strikmateriale til bækkenet	1 – 3	129 2521 0080 00°
04 Led, ikke forkrøppet	universal	122 2523 1080 000
05 Led, forkrøppet	universal	122 2522 1080 001
06 Begrænsningssæt (5 dækstykker, 10 låsestifter)		129 2534 0000 000
07 Hofteskål med monteringsæt	1 – 3	129 2535 0000 +0°
08 Unbrakonøgle 3 mm		190 0007 0010 102

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre

BEMÆRK: Det er ikke muligt at samle en komplet SofTec Coxa ud fra disse reservedele.



TIL BEHANDLING AF RYGSØJLE OG HALS

Lukningsforlænger

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Lukningsforlænger rygprodukt, short Kan anvendes ved følgende produkt: SofTec Lumbo short	universal	129 8488 0082 000
02 Lukningsforlænger rygprodukt, long Kan anvendes ved følgende produkter: SofTec Lumbo long, SofTec Dorso long + short, SecuTec Dorso, SecuTec Lumbo, LumboLoc Forte, LordoLoc	universal	129 8488 1081 000



LumboTrain® | LumboTrain® Lady

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Nopret pelotte, inkl. betræk	universal	129 8456 0071 000



01

LumboLoc® Forte

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Korsbenspelotte	universal	121 8404 0050 001
02 Lændepelotte	universal	121 8405 0050 001




01

02

SacroLoc®

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Pelotter (2-delte)	universal	119 8416 0000 000

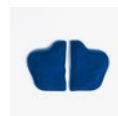

01

SecuTec® Lumbo

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 CFK-stativ	universal	129 8463 008#000
02 Velourlomme		129 8461 008#000
03 Velcrostykker ramme		129 8465 0000 000
04 Abdominalpelotte (lille)	universal	129 8531 0000 000

= Udførelse (1) short, (2) long



01



02



03



04

SofTec® Lumbo

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Skål, short	1-3	129 8482 0031 00°
02 Skål, long	1-4	129 8482 0032 00°
03 CFK-stiver	universal	129 8483 007#000
04 Korsetstiver	universal	129 8484 008#000
05 Abdominalpelotte (stor)	universal	129 8481 0080 000
06 Elastik		129 8485 008#000
07 Indvendigt strikmateriale, short	1-3	129 8486 0081 00°
08 Indvendigt strikmateriale, long	1-4	129 8486 0082 00°
09 Udvendigt strikmateriale, short	1-3	129 8487 0081 00°
10 Udvendigt strikmateriale, long	1-4	129 8487 0082 00°

= Udførelse (1) short, (2) long



01



02



03



04



05



06



07|08



09



10

DorsoTrain®

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Reklinator, short	universal	129 8456 0071 000
02 Reklinator, long	universal	129 8456 0072 000



01|02

SofTec® Dorso

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Reklinator (med puder)	universal	129 8498 1170 000
02 Reklinatorpolstring	universal	129 8501 1000 000
03 Sæt A (kryds + monteringssæt)		129 8493 1000 000
04 Kryds		129 8499 1170 000
05 Monteringssæt		129 8502 1000 000
06 Sæt B (2 skulderremme + 2 puder)	universal	129 8494 0080 000
07 Skuldersele (indhold: 2 seler)	universal	129 8496 0080 000
08 Skulderpolstring (indhold: 2 puder)	universal	129 8497 0080 000
09 Indvendigt strikkemateriale	1-4	129 8492 0080 00°
10 Udvendigt strikkemateriale	1-4	129 8491 008#00°

= Udførelse (1) short, (2) long



01



02




03



04



05

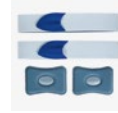

06



07



08



09



10

Spinova®

BETEGNELSER		UDFØRELSE	STØRRELSE°
01	Mavelukning, sæt		
02	Basisbandage med korsetstivere		1 – 7
03	Lukningsforlænger		
04	Stropper, sæt**		1 – 5
05	Sideclips, sæt (10 stk.)		
06	Rygkassette, sæt		
07	Skålsystem, sæt**	small	
		large	
08	Skålbetræk, sæt**	short	1 – 2
		long	1 – 2
09	Støttestativ	short	
		long	
10	Støttepelotte	standard	
		short	
11	Puder, støttepelotte	short	
12	Kerne, støttepelotte	short	
13	Hylster, støttestativ, sæt (4 stk.)		
14	Runde velcrostykker til fiksering af rygkassette		
15	Velkrostrimler til fiksering af ramme, sæt (10 stk.)		
16	Plastnitte til støttestativ, sæt (20 stk.)		
17	Skulderpolstring, sæt		
18	Reklinator (uden betræk)	S – L	1 – 3
19	Skruesæt Immo		
20	Unbrakonøgle Immo		
21	Torxnøgle til stropsystem		
22	Abdominalpelotte	large	
23	Momentnøgle		



01



02



03



04




05



06



07

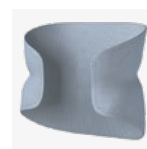

08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19




20



21



22

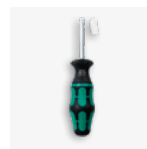

23

Stabi Classic	Support Plus	Support Plus Classic	Unload Classic	Unload Plus	Immo Plus	Immo Plus Classic	Immo	Osteo	ARTIKEL-NUMMER
●	●	●	●	●	●	●	●		129 8545 0000 000
	●			●	●				129 8544 0000 00°
●	●	●	●	●	●	●	●		129 8565 0000 000
	●			●	●		●		129 8546 0000 00°
	●			●	●		●		129 8547 0000 000
	●			●	●		●		129 8548 0000 000
					●	●	●		129 8554 0000 001
					●	●	●		129 8554 0000 002
					●				129 8566 0001 00°
		●			●				129 8566 0002 00°
		●	●	●					129 8552 0001 000
		●	●	●					129 8552 0002 000
	●								129 8549 0000 000
	●								129 8549 0001 000
	●								129 8561 0001 000
	●								129 8562 0001 000
			●	●					129 8553 0000 000
							●		129 8555 0000 000
			●	●		●			129 8550 0000 000
			●	●		●			129 8551 0000 000
								●	129 8517 0000 000
		●				●		●	129 8570 0000 00°
					●		●		129 8556 0000 000
					●		●		129 8557 0000 000
	●			●	●		●		129 8558 0000 000
	●			●	●				129 8481 0080 000
	●			●	●		●		129 8560 0000 000

** STØRRELSESTILORDNING (i cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–140
Produkt	1	2	3	4	5	6	7
Basisbandage	1	2	3	4	5	6	7
Stropper	1	2	3	4	5		
Skålsystem (standardhøjde)	1 (small)				2 (large)		
Skålbetræk	1 (short / long)				2 (short / long)		

° Til patienter, der er mere end 170 cm høje

FOD OG
ANKEL

KNÆ, LÅR OG
HOFT

RYGSØJLE OG
HALS

HÅND, ALBUE OG
SKULDER

TILBEHØR OG
RESERVEDELE

EFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

TIL BEHANDLING AF HÅND, ALBUE OG SKULDER

ManuTrain®

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Velcrobånd (til størrelserne 1–4)	1	129 5152 20*0 001
02 Velcrobånd (til størrelserne 5–6)	2	129 5152 20*0 002
03 Stiver grå	universal	129 5151 1120 +00

* = Farve (1) beige, (5) blå
+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre



ManuLoc® long

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Erstatningsremme (4 stk.), farve: titan	universal	129 5343 0080 000



ManuLoc® long Plus

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Fingerstøtte med rem, farve: titan	1	129 5342 0080 00#
02 Erstatningsremme (4 stk.), farve: titan	universal	129 5343 0080 000

= Udførelse (1) størrelse S, (3) størrelse L



ManuLoc® Rhizo

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Tommelstøtte	0–3	129 5346 0080 +0°

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre



ManuLoc® Rhizo long



BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Erstatningsremme (4 stk.), farve: titan	universal	129 5343 0080 000



ManuLoc® Rhizo long Plus

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Fingerstøtte med rem, farve: titan	1	129 5342 0080 00#
02 Erstatningsremme (4 stk.), farve: titan	universal	129 5343 0080 000

= Udførelse (1) størrelse S, (3) størrelse L

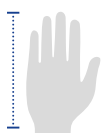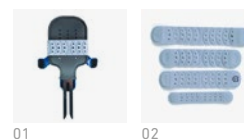

Måltagning til fingerstøtterne
størrelse S: til 18 cm
størrelse L: til 19,5 cm

EpiTrain®

BETEGNELSER	STØRRELSE°	ARTIKEL-NR.
01 Rem, farve: blå	0-6	119 6163 4080 00°



01

OmoTrain®

BETEGNELSER	ARTIKEL-NR.
01 Spænde, farve: grå	119 7172 0000 000



01

OmoLoc®

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Skuldersele	universal	129 7506 0000 000



01

SecuTec® Omo

BETEGNELSER	STØRRELSE	ARTIKEL-NR.
01 Pudesæt og nitter	universal	129 7504 0000 000
02 Maverem og lukningssystem	universal	129 7507 0000 000
03 Velcrobåndsæt armstøtte	universal	129 7508 0000 000
04 Sæt med smådele	universal	129 7509 0000 000
05 Håndstøtte, pude og nitter		129 7511 0000 +00
06 Skuldersele	universal	129 7506 0000 000

+ = Udførelse (6) højre, (7) venstre



01



02



03



04



05



06



- ☐ links
- ☐ natur
- ☐ Klettverschluss*
- ☐ Anziehschlaufen*
- ☐ oben**
- ☐ Klettverschluss*
- ☐ Anziehschlaufen*
- ☐ oben**

Angaben zum Patienten***

- ☐ männlich
- ☐ adipös

Alter _____

- ☐ unten
- ☐ weiblich
- ☐ muskulös

Körpergröße _____

- * aufpreispflichtig
- ** nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär
- *** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

Gibt alle Maßangaben

stets 14 cm oberhalb der
Umfang bei f¹ größer als 47 cm
essen, mindestens bei e-f = 17 cm.

Stempel

ten-Nr.



EFTER MÅL OG SERIEFREMSTILLET

FOD OG
ANKELKNÆ, LÅR OG
HOFTRYGSØJLE OG
HALSHÅND, ALBUE OG
SKULDERTILBEHØR OG
RESERVEDELEEFTER MÅL OG
SERIEFREMSTILLET

KORREKT MÅLTAGNING TIL OPTIMAL BEHANDLINGSSUCCESS

Medicinske hjælpemidler kan kun virke 100 %, hvis de virkelig passer. Dette forudsætter, at de relevante kropsmål bestemmes nøjagtigt. Derfor har vi udviklet forskellige bestillingssedler til specialfremstillede produkter. De gør det nemt og enkelt for dig at bestille det ønskede Bauerfeind-produkt i den nødvendige udførelse.



TIPS OMKRING MÅLTAGNING

Tag mål af alle værdier, der er angivet på opmålingsskemaet – kun hvis dataene er komplette er det muligt at sy efter mål.

Personer med en udtalt tendens til hævelser skal om muligt måles om morgenen.

Anbring længdemærker på huden med en eyeliner eller en anden hudvenlig pen for at gøre omkredsmålingerne sikre og reproducerbare.

Ved behandling af begge sider bør du måle hver side for sig.

Mål op efter anvisningerne.

Kontroller efter målingen, at alle nødvendige målinger af længde- og omkredsmål er specificeret.

Knæ

Måltagning foretages stående med 30° knæbøjning, hvis kroppen tillader det.

Alle målinger skal foretages direkte på det afklædte ben.

Viser kunden svagt bindevæv, hudlapper osv. kan måleproceduren gøres nemmere ved hjælp af påtagningen af et par nylonstrømpebukser.

Måling foregår på siden af benet med udgangspunkt fra midten af knæskallen og ud på lateral-siden af benet.

Afhængigt af produktet skal der tages hensyn til den opkrævede minimumslængde af omkredsmålene.

Fra en låromkreds på mere end 60 cm anbefales det at forsyne bandagen med et silikonebånd.

Fod

Længdemålingen finder sted stående, hvis patientens fysiske tilstand tillader det.

Fodlængden måles eksternt fra hælen til lilletåens grundled.

BESTILLING EFTER MÅL

GenuTrain®



FYSIO-SHOP.DK

DATA

(f.eks. patientnavn,
patientforkortelse)

	Omkreds	Længde
	f ¹	e - f ¹
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c

Det er absolut nødvendigt at oplyse alle mål, så produktet kan tilpasses korrekt.

f¹ Lår: Omkredsen skal måles mindst 14 cm over midten af knæet (e). Hvis omkredsen ved f¹ er større end 47 cm er det nødvendigt at måle højere oppe, mindst ved e - f¹ = 17 cm.

f Starten af låret

e Midt på knæet

d Tyndeste sted under knæet

c Tykkeste sted på læggen: Omkredsen skal måles mindst 12 cm under midten af knæet (e).

Bemærk:

- Foretag målingen ved svag bøjning (30°).
- Længdemålet foretages på ydersiden af benet. Afstanden e - f¹ bør ikke være kortere end afstanden e - c.
- Fra et omfang på f¹ > 60 cm anbefales det at anvende et nopret hæftebånd.

☐ **Prisoverslag**☐ **Bestilling****Knæ**
☐ højre ☐ venstre
Farve
☐ titan ☐ natur
Tilbehør
☐ Silikonebånd* (læg +5 cm til længden)

☐ Påtagingsstropper*
Velcrolukning*
☐ foroven** ☐ forneden
Oplysninger om patienten***
☐ mand ☐ kvinde

☐ overvægtig ☐ muskuløs

Alder _____ Højde _____

* Merpris

** Ikke muligt i kombination med silikonebånd; ikke cirkulært

*** Valgfrit, angiv venligst ved anatomiske særkendetegn for præcis pasform

Personen bag bestillingen hæfter for forkerte målangivelser. Produkter fremstillet efter mål tages ikke retur.

Kundenr.

Underskrift

Dato

BESTILLING EFTER MÅL

GenuTrain® P3



DATA

(f.eks. patientnavn)

FYSIO-SHOP.DK

☐ **short** (op til ca. 170 cm højde)

	Omkreds	Længde
	f ¹	e - f ¹ = 18 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b ¹	e - b ¹ = 15 cm

☐ **long** (fra ca. 170 cm længde)

	Omkreds	Længde
	f ¹	e - f ¹ = 22 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b ¹	e - b ¹ = 17 cm

Bemærk:

- Stående, foretag målingen ved svag bøjning (30°)
- Længdemålet skal foretages på ydersiden af benet

Vær opmærksom på følgende:

- min. omkreds f¹ = 39 cm
- min. omkreds f = 37 cm
- min. omkreds e = 30 cm
- min. omkreds b¹ = 28 cm

☐ **Prisoverslag** ☐ **Bestilling**
Knæ

- ☐
- højre
- ☐
- venstre

Farve

- ☐
- titan
- ☐
- natur

Tilbehør

- ☐
- Silikonebånd* (læg +5 cm til længden)

Justeringsbåndets placering

- ☐
- Standard (lateralt)
- ☐
- Afvigelse (medial)

Oplysninger om patienten**

- ☐
- mand
- ☐
- kvinde
-
- ☐
- overvægtig
- ☐
- muskuløs

Alder: _____ Højde: _____ cm

* Merpris pålægges – vær opmærksom på den ekstra længde under opmålingen af patienten

** Valgfrit, angiv venligst ved anatomiske særkendetegn for præcis pasform

Personen bag bestillingen hæfter for forkerte målangivelser.

Produkter fremstillet efter mål tages ikke retur.

Det er absolut nødvendigt at oplyse alle mål, så produktet kan tilpasses korrekt.

- f¹ Lår / øverste bandagekant
 f Starten af låret (ca. midt mellem e und f¹)
 e Midt på knæet
 d Tyndeste sted under knæet, ca. 5–6 cm
 c (tykkeste) sted på læggen
 b¹ Nederste bandagekant

Stempel

Kundenr.

Underskrift _____

Dato _____

BESTILLING EFTER MÅL

GenuTrain® S



DATA

(f.eks. patientnavn,
patientforkortelse)

FYSIO-SHOP.DK

☐ **Prisoverslag**

☐ **Bestilling**

	Omkreds	Længde
	f ¹	short: e - f ¹ = 18 cm long: e - f ¹ = 21 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b ¹	e - b ¹ = 18 cm

Knæ

☐ venstre

☐ højre

☐ kort / short

(Bandagelængde lår [e - f¹] = 18 cm)

☐ lang / long

(Bandagelængde lår [e - f¹] = 21 cm)

Tilbehør

☐ Silikonebånd* (læg 5 cm til længden)

Oplysninger om patienten**

☐ mand

☐ kvinde

☐ overvægtig

☐ muskuløs

Alder _____

Højde _____

* Merpris pålægges – vær opmærksom på den ekstra længde under målingen af patienten

** Valgfrit, angiv venligst ved anatomiske særkendetegn for præcis pasform

Det er absolut nødvendigt at oplyse alle mål, så produktet kan tilpasses korrekt.

f¹ Lår
kort / short-version: Omkredsen skal måles mindst 18 cm over midten af knæet (e).
lang / long-version: Omkredsen skal måles mindst 21 cm over midten af knæet (e).

f Starten af låret

e Midt på knæet

d Tyndeste sted under knæet

c Tykkeste sted på læggen: Omkredsen skal måles mindst 12 cm under midten af knæet (e).

b¹ Tykkeste sted på læggen 18 cm under knæet

Bemærk:

- Bestilling efter mål kun i farven titan.
- Foretag målingen ved svag bøjning (30°).
- Længdemålet foretages på ydersiden af benet.
- Hvorvidt det skal vælge short / long afhænger af de aktuelle patientmål.
- Long-versionen anbefales til personer højere end 1,80 m.
- Følgende omkredsmål er nødvendige for korrekt pasform:
 - f (14 cm over knæet): mindst 38 cm
 - e (midt på knæet): mindst 32,5 cm
 - c (12 cm under knæet): mindst 28 cm



Stempel

Kundenr. _____

Underskrift _____

Dato _____

BESTILLING EFTER MÅL

GenuTrain® S Pro



DATA

(f.eks. patientnavn,
patientforkortelse)

FYSIO-SHOP.DK

☐ **Prisoverslag**

☐ **Bestilling**

	Omkreds	Længde
	f ¹	short: e – f ¹ = 18 cm long: e – f ¹ = 21 cm
	f	e – f
	e	
	d	e – d
	c	e – c
	b ¹	e – b ¹ = 18 cm

Knæ

☐ venstre

☐ højre

☐ kort / short

(Bandagelængde lår [e – f¹] = 18 cm)

☐ lang / long

(Bandagelængde lår [e – f¹] = 21 cm)

Tilbehør

☐ Silikonebånd* (læg 5 cm til længden)

Oplysninger om patienten**

☐ mand

☐ kvinde

☐ overvægtig

☐ muskuløs

Alder _____

Højde _____

* Merpris pålægges – vær opmærksom på den ekstra længde under målingen af patienten

** Valgfrit, angiv venligst ved anatomiske særkendetegn for præcis pasform

Det er absolut nødvendigt at oplyse alle mål, så produktet kan tilpasses korrekt.

f¹ Lår
kort / short-version: Omkredsen skal måles mindst 18 cm over midten af knæet (e).
lang / long-version: Omkredsen skal måles mindst 21 cm over midten af knæet (e).

f Starten af låret

e Midt på knæet

d Tyndeste sted under knæet

c Tykkeste sted på læggen: Omkredsen skal måles mindst 12 cm under midten af knæet (e).

b¹ Tykkeste sted på læggen 18 cm under knæet

Bemærk:

- Bestilling efter mål kun i farven titan.
- Foretag målingen ved svag bøjning (30°).
- Længdemålet foretages på ydersiden af benet.
- Hvorvidt det skal vælges short / long afhænger af de aktuelle patientmål.
- Long-versionen anbefales til personer højere end 1,80 m.
- Følgende omkredsmål er nødvendige for korrekt pasform:
 - f (14 cm over knæet): mindst 38 cm
 - e (midt på knæet): mindst 32,5 cm
 - c (12 cm under knæet): mindst 28 cm

Personen bag bestillingen hæfter for forkerte målangivelser. Produkter fremstillet efter mål tages ikke retur.

Stempel

Kundenr. _____

Underskrift _____

Dato _____

BESTILLING EFTER MÅL

MalleoTrain®




FYSIO-SHOP.DK

DATA

(f.eks. patientnavn,
patientforkortelse)

Omkreds

Længde

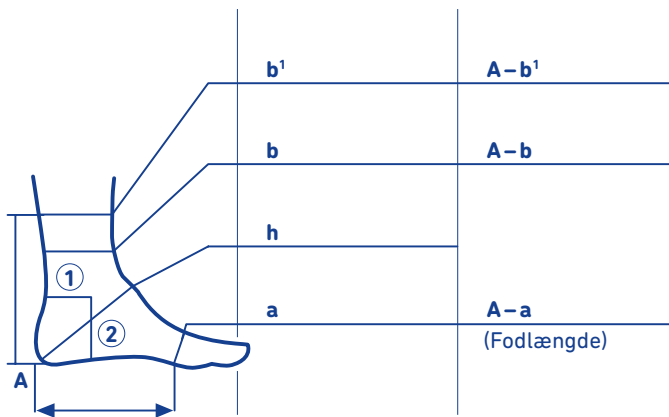

Det er absolut nødvendigt at oplyse alle mål, så produktet kan tilpasses korrekt.

b' Starten af læggen: Omkredsen skal måles mindst 16 cm over hælen (A).

b Mindste omkreds over anklen

h Vrist (cirkulært mål, målt fra vristen over hælen)

a Omkreds bagved lilletåens grundled

A Hæl

A-a Fodlængde uden tåspids

Bemærk:

- Pelottepunkter skal kun angives ved ønske om speciel placering.
- Afstand ① fra indvendig til udvendig ankelkno (målt vandret over akillesenen)
- Afstand ② fra indvendig til udvendig ankelkno (målt over fodsålen)

☐ **Prisoverslag**
☐ **Bestilling**
Fod
☐ højre

☐ venstre
Farve
☐ titan

☐ natur
Tilbehør
☐ Velcrolukning*
Pelotte-målepunkter**

①

②

Oplysninger om patienten***
☐ mand

☐ kvinde

☐ overvægtig

☐ muskuløs

Alder

Højde

* Merpris

** Specialpositioner for pelotter (ankelknoernes placering afviger meget fra standarden)

*** Valgfrit, angiv venligst ved anatomiske særkendetegn for præcis pasform

Personen bag bestillingen hæfter for forkerte målangivelser. Produkter fremstillet efter mål tages ikke retur.

Kundenr.

Underskrift

Dato

BESTILLING EFTER MÅL


EpiTrain®



FYSIO-SHOP.DK

DATA

(f.eks. patientnavn,
patientforkortelse)

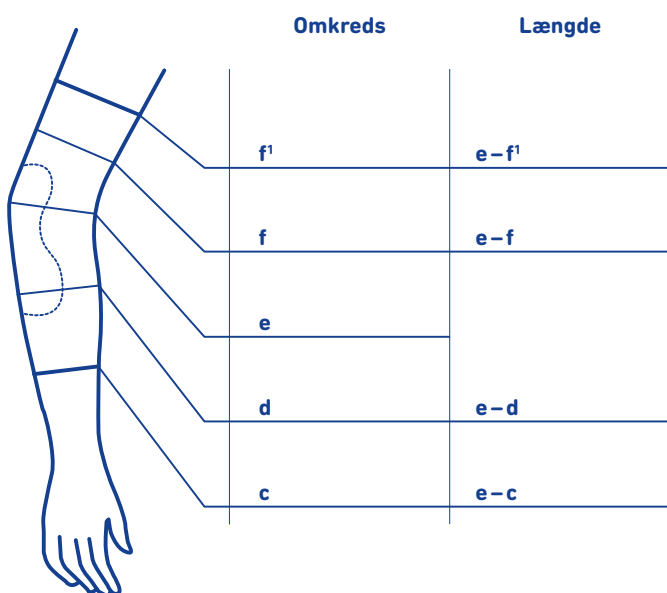☐ **Prisoverslag**
☐ **Bestilling**


Arm

☐ højre ☐ venstre

Farve

☐ titan ☐ natur

Tilbehør

☐ Silikonebånd* (læg +3 cm til længden)

Velcrolukning*

☐ foroven** ☐ forneden

Oplysninger om patienten***

☐ mand ☐ kvinde

☐ overvægtig ☐ muskuløs

Alder _____ Højde _____

* Merpris

** Ikke muligt i kombination med silikonebånd; ikke cirkulært

*** Valgfrit, angiv venligst ved anatomiske særkendetegn for præcis pasform

Det er absolut nødvendigt at oplyse alle mål, så produktet kan tilpasses korrekt.

f¹ Overarm: Omkredsen skal måles mindst 10 cm over albuebøjningen (e).

f Starten af overarmen

e Albuebøjningen

d Midt på underarmsmusklen

c Starten af musklen: Omkredsen skal måles mindst 12 cm under albuebøjningen (e).

Bemærk:

- Foretag målingen ved svag bøjning (30°).
- Udgangspunktet for længdemålingen er albuebøjningen (e).
- Skræddersyede modeller indeholder ingen rem

Personen bag bestillingen hæfter for forkerte målangivelser. Produkter fremstillet efter mål tages ikke retur.

Stempel

Kundenr. _____

Underskrift _____



Dato _____

KVALITET KAN MÅLES. BAUERFEIND-MÅLETEKNIK




BODYTRONIC® 600 HELKROPSSCANNER INKLUSIV PRODUKTFORSYNING AF DE LAVERE EKSTREMITETER

- Kontaktløs, tekstilfri måling til kompressionsstrømper, knæ- og fodbandager samt knæortoser
- Overkropsscanning mulig, eksport af 3D-data
- Integreret benvolumenmåling
- Gulvareal på 2,80 m²

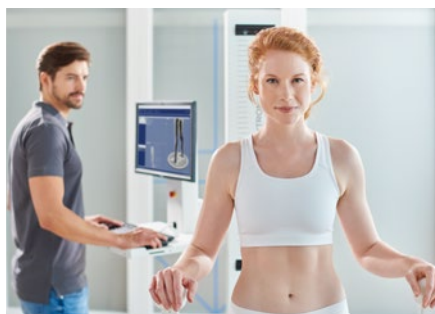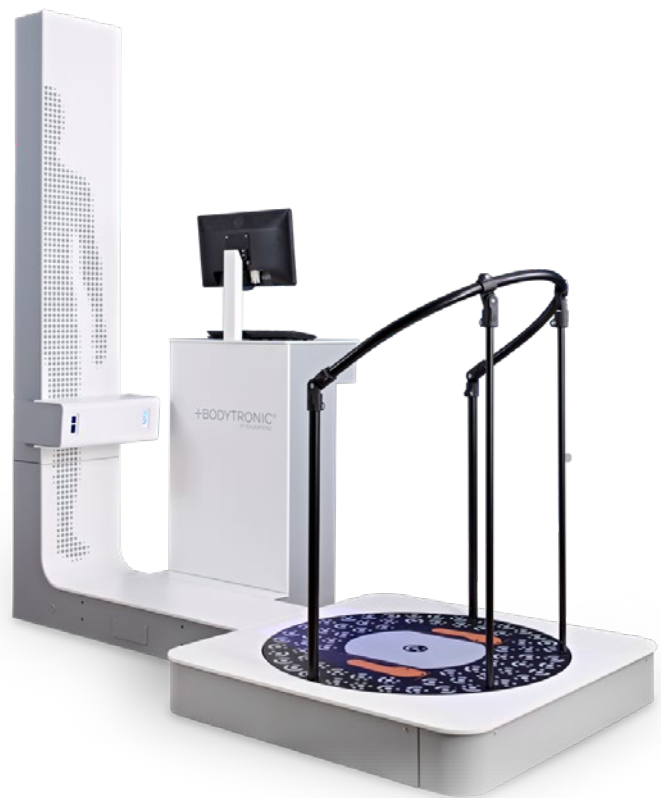

SCANNER OG KAMERA
Ved hjælp af stribe-lysprojektion projiceres mønstre på måleobjektet og registreres digitalt. Softwaren beregner det nøjagtige 3D-billede ud fra billedoplysningerne.

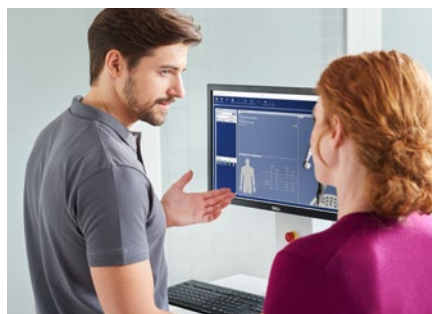

SELVROTTERENDE MÅLEPLATFORM
Bevæger patienten jævnt og udelukker således fejlkilder ved målingen.